

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring  
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

## Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op [www.hupfer.com/de/avb](http://www.hupfer.com/de/avb) zijn van toepassing.  
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele  
prijzen op [www.hupfer.com](http://www.hupfer.com) zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.  
Kastanjelaan 41  
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666  
[info@cazandermedical.nl](mailto:info@cazandermedical.nl)  
[www.cazandermedical.nl](http://www.cazandermedical.nl)

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.  
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen  
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



**HUPFER**  
we make work flow

**HUPFER**  
we make work flow

# Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





## Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

## Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.

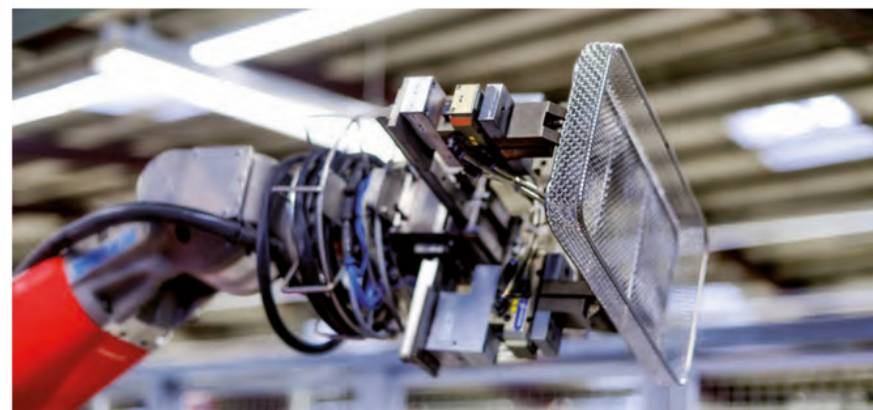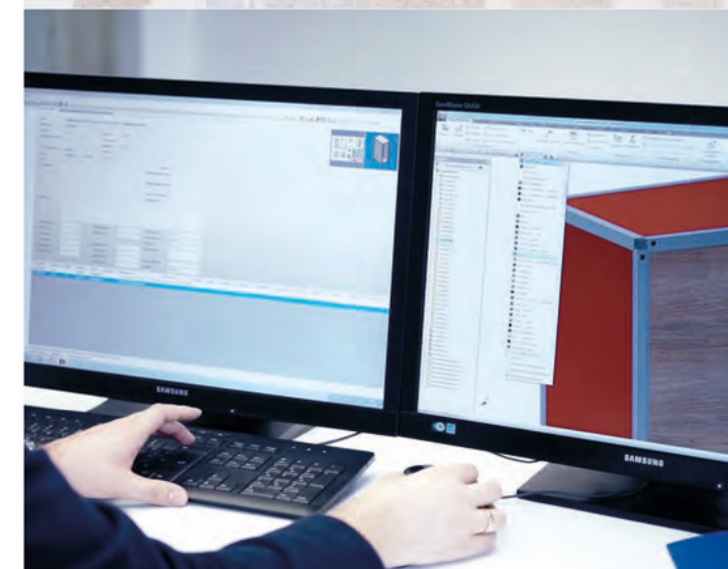

# Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:  
maximale veiligheid en hygiëne

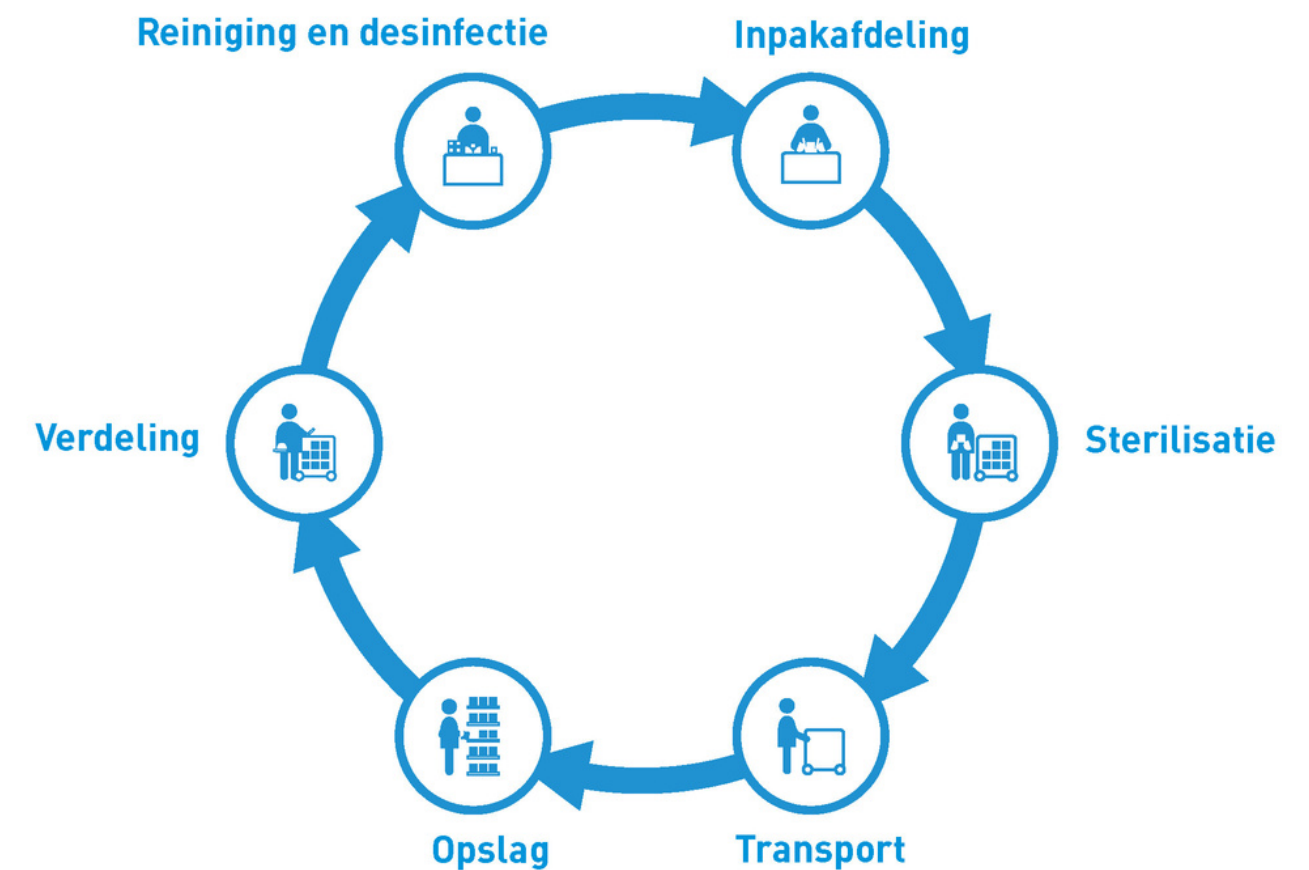

# Medisch meubilair

Medisch meubilair en inrichtingsobjecten van Hupfer overtuigen door hun hoogwaardige afwerking, hun flexibiliteit en extreme belastbaarheid tijdens zwaar gebruik. Met MediFurn® omvat het productassortiment ook een generatie meubels die nieuwe maatstaven stelt op het gebied van functionaliteit, afwerking en design. Dankzij een naadloze afwerking is de reiniging eenvoudiger en bieden ze meer zekerheid op het gebied van hygiëne.



# Medisch meubilair

## Doorgeefkasten



Hupfer doorgeefkasten dienen als sluis voor het tussentijds opslaan van goederen tussen een schoon en onrein gebied. Ook worden ze gebruikt voor de verzorging met steriele goederen en de afvalverwerking van vuil materiaal op Hupfer transportwagens.

De stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal bestaat uit een aan alle zijden gesloten frame met steeds twee dubbelwandige vleugeldeuren op de schone en onreine zijde. De wederzijdse vergrendeling van de beide deurzijden door het elektromagnetische deurslot voorkomt dat de deuren tegelijk aan de schone en onreine zijde geopend worden. Rode signaallampen signaleren geopende deuren op de tegenoverliggende zijde. Met groene verlichte drukknoppen kunnen de onderliggende deuren vrijgegeven worden, indien de deuren op de tegenoverliggende zijde gesloten zijn.



**Doorgeefkast**  
■ Elektrische vergrendeling

|                        | Transportwagens | Afmetingen<br>b x d x h mm | Artikel-<br>nummer |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------|
| DRS 6StE 1150/900/1800 | 6 StE           | 1150 x 960 x 1800          | 7504604            |
| DRS 9StE 1435/900/1800 | 9 StE           | 1436 x 960 x 1800          | 7504605            |

