

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



HUPFER
we make work flow

HUPFER
we make work flow

Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.

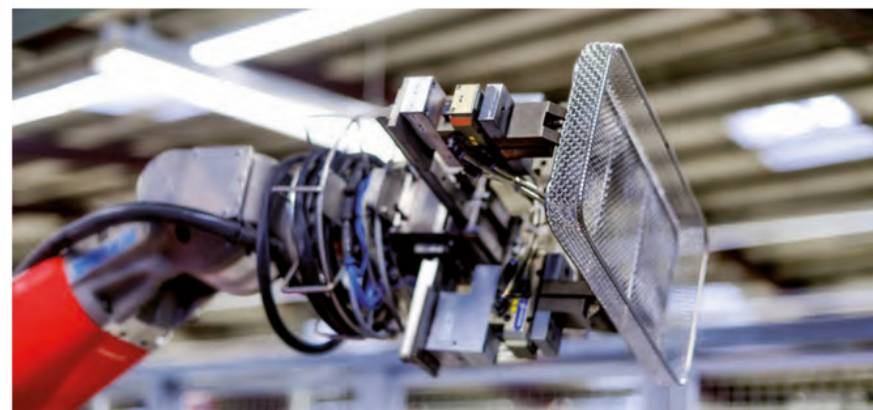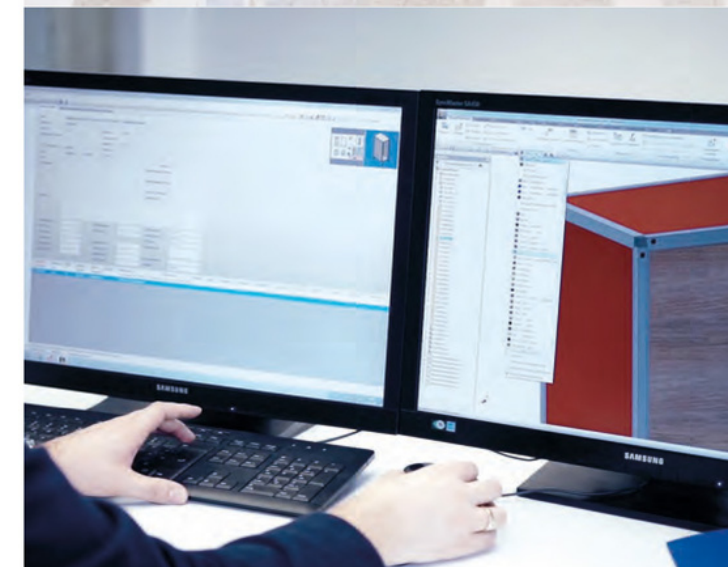

Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne

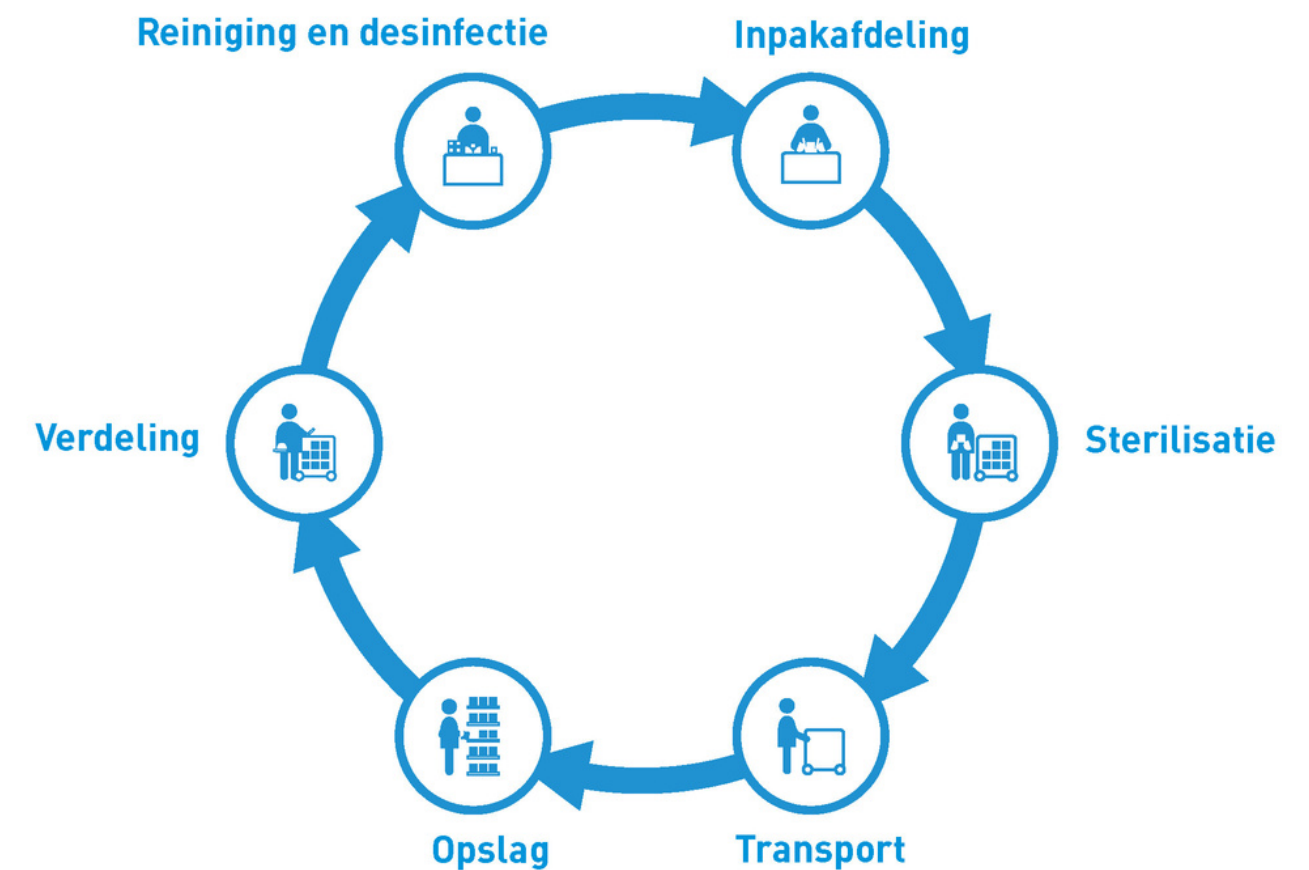

Känguruh-systeem®

Het Känguruh-systeem® van Hupfer zorgt voor een betrouwbare en consequente scheiding van het schone en vuile gebied. Het tot dusver nodige hersorteren is overbodig. Werkprocessen worden sneller en kosten minder moeite. De ergonomische hantering en het precieze samenspel van alle componenten waarborgen op elk moment veilige en duidelijke procedures en zorgen voor maximale hygiëne in de complete sterielgoedkringloop.



Känguruh-systeem®



Geïntegreerd systeem voor de opslag, het transport en de uitgifte van sterielgoed

Het **inschuifrek** wordt afhankelijk van het uitgangspunt beladen met vervuilde of steriele instrumenten. Het biedt ruimte voor korven en bakken in het StE- of ISO-formaat en beschermt de instrumenten van de reiniging en sterilisatie tot aan de opslag en verdeling. Aanvullend kan een passend **onderstel** voor de opslag van inschuifrekken ingezet worden. Dit is onder andere ideaal te integreren in het Hupfer Norm 5 stellingsysteem.

Vanaf de **overnamewagen** wordt het beladen inschuifrek in het sterilisatie-apparaat geschoven. Na de sterilisatie kan het inschuifrek met de instrumenten direct in de **transportwagen** gebracht worden en daarna veilig naar de opslaglocatie of voor verder gebruik de operatiekamer binnengereden worden. Volledig zonder tijdrovend herordenen en handcontact.



Overdracht door middel van doorgeeffkast



Vastkoppelen aan een overgavedorpel

De voordelen in een overzicht:

- Geïntegreerd systeem voor de opslag, het transport en de uitgifte van sterielgoed
- Geen tijdrovend herordenen na de reiniging, desinfectie en controle van de werking
- De hoogste roestvrijstalen kwaliteit voor het zwaarste gebruik en maximale hygiëne
- Uitstekende ergonomie en flexibel te hanteren
- Alle processtappen zonder handcontact aan de korf of de container
- Optimalisatie van de arbeidsefficiëntie en hygiëneveiligheid
- Overnamewagens, transportwagens, onderstellen en inschuifrekken in veel varianten en speciale uitvoeringen
- Ook aan chauffeurloze transportsystemen aan te passen



Chauffeurloos transportsysteem met Känguruh-systeem® transportwagens



Extern transport met een vrachtwagen

Känguruh-systeem®



Intelligente logistiek tot in de details

In het Hupfer Känguruh-systeem® gaan vele jaren ervaring uit de sterielgoedlogistiek en de nieuwste constructie- en fabricage-knowhow schuil. De unieke functionaliteit en de hoge kwaliteit van het materiaal en de afwerking komen tot uiting in het totaalconcept, maar ook in veel praktische details voor efficiënt en ergonomisch werken.



Aankoppelen aan de langs- of dwarszijde optioneel mogelijk.



L- of U-geleiders geschikt voor StE- en ISO- korven.



Met de optionele 3- of 4-zijdige galerij wordt ook het wagendak een opslag- of transportruimte.



Met de optionele papierklem kunnen de transportwagens heel eenvoudig gemarkeerd worden. Op aanvraag zijn etikettenhouders in verschillende formaten leverbaar.



De transportwagen is ook verkrijgbaar als universele transportwagen voor het transport van uiteenlopende goederen.



Met de optionele centrale blokkeerrem is de wagen met een voetbeweging te fixeren.



Met draadroosters en geperforeerde platen om op de L-geleiders te leggen kunnen uiteenlopende goederen en verpakkingen opgeslagen worden. Inschuifframesets als bijzondere uitrusting maken het werk nog eenvoudiger.



Voor het transporteren met een vrachtwagen zijn de wagens op aanvraag met speciale aanrijdbescherming leverbaar.



Het optionele transportslot met verzegeling zorgt voor maximale veiligheid van het sterielgoed.



Voor maximaal overzicht zorgen de optionele etikettenhouders.

Planning en configuratie op maat

Het Känguruh-systeem® wordt van de planning tot aan de configuratie aan de betreffende logistieke eisen en de aanwezige technische inrichting aangepast. Zo zijn de overnamewagens behalve in de standaard uitvoering ook leverbaar in volledig gelaste uitvoeringen voor maximale hygiëneveiligheid. Bovendien kan het volledige systeem ook in speciale in-house-transportvormen en zelfs in het chauffeurloze transportsysteem geïntegreerd worden.



Känguruh-systeem®



Overnamewagens

- Veilige vergrendeling aan de transportwagen
- Veilige vergrendeling van het inschuifrek
- Optioneel in een voor sterilisatie- en wasinstallaties geschikte uitvoering

StE • 600 x 300 mm

	StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-ÜW 3StE 717/425/909 SH260	3	717 x 425 x 909	7504618
KÄ-ÜW 6StE 854/677/909 SH260	6	854 x 677 x 909	7504621
KÄ-ÜW 9StE/2xISO 1137/677/909 SH260	9	1137 x 677 x 909	7504627

ISO • 600 x 400 mm

	ISO	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-ÜW 1xISO 717/560/909 SH260	3	717 x 560 x 909	7504651
KÄ-ÜW 9StE/2xISO 1137/677/909 SH260	6	1137 x 677 x 909	7504627



Transportwagens

- Roestvrij staal
- Verschillende wieluitvoeringen en -uitrustingen
- Voortrekken met koppeling/dissel (ook met gedempte wrijving)

StE • 600 x 300 mm

	Uitvoering	StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-TW/VV 3StE 724/754/1444 SH260	volledig gelast	3	724 x 754 x 1444	7505986
KÄ-TW/S 6StE 965/751/1471	Standaard	6	965 x 751 x 1471	7504659
KÄ-TW/VV 6StE 965/754/1444 SH260	volledig gelast	6	965 x 754 x 1444	7504617
KÄ-TW/S 9StE 1285/751/1471 SH 260	Standaard	9	1285 x 751 x 1471	7504660
KÄ-TW/VV 9StE 1249/754/1434 SH260	volledig gelast	9	1249 x 754 x 1434	7504624

ISO • 600 x 400 mm

	Uitvoering	ISO	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-TW/VV 3StE 724/754/1444 SH260	volledig gelast	3	724 x 754 x 1444	7505986
KÄ-TW/S 9StE 1285/751/1471 SH 260	Standaard	6	1285 x 751 x 1471	7504660
KÄ-TW/VV 9StE 1249/754/1434 SH260	volledig gelast	6	1249 x 754 x 1434	7504624



Onderstel

- Roestvrij staal
- Voor het neerzetten en opslaan van het inschuifrek
- Afdekking onderstel op aanvraag

StE • 600 x 300 mm

	StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-UG 6StE 850/700/307 SH260	2 x 3 / 1 x 6	850 x 700 x 307	7504619
KÄ-UG 9StE 1130/700/307 SH 260	9	1130 x 700 x 307	7504628

ISO • 600 x 400 mm

	ISO	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-UG 9StE 1130/700/307 SH 260	2 x 1 ISO of 1 x 2 ISO	1130 x 700 x 307	7504628



Inschuifrek

- Roestvrij staal
- Voor de opname van StE- en ISO-korven of bakken

StE

	StE	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-EG 3StE 355/615/1041 L-Sch	3	355 x 615 x 1041	7504595
KÄ-EG 6StE 685/615/1041 3 DR	6	685 x 615 x 1041	7504620
KÄ-EG 6StE 685/615/1041 L-Sch	6	685 x 615 x 1041	7504622
KÄ-EG 9StE 1015/615/1041 3 DR	9	1015 x 615 x 1041	7504625
KÄ-EG 9StE 1015/600/1041 L-Sch	9	1015 x 600 x 1041	7504626

ISO • 600 x 400 mm

	ISO	Afmetingen b x d x h mm	Artikel- nummer
KÄ-EG ISO 455/615/1041 8U-Sch	3	455 x 615 x 1041	7504649
KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch	6	885 x 615 x 1041	7504650