

Warm aanbevolen: de kennis en ervaring
van onze experts

Wij geven u graag advies

MEDICAL

Productoverzicht

Overhandigd door

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op www.hupfer.com/de/avb zijn van toepassing.
Prijzen excl. wettelijke btw en verzendkosten. De dagelijks actuele
prijzen op www.hupfer.com zijn van toepassing

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

Telefoon +31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl

*RWS 03/20 Hupfer 2020. Alle gegevens / afmetingen zijn ca. gegevens. Technische wijzigingen voorbehouden.
Iedere vorm van vermenigvuldiging, ook van delen, alleen met toestemming. Alle afbeeldingen zijn voorbeelden, ter illustratie en ze kunnen
bijzondere accessoires bevatten. Concept en lay-out: RWS Group Deutschland GmbH, Berlin*



HUPFER
we make work flow

HUPFER
we make work flow

Ons meest succesvolle product is klanttevredenheid



De draad- en metaalverwerking is het begin van ons succesverhaal. Aan dit verhaal voegden we in de loop van de jaren veel nieuwe boeiende hoofdstukken toe. Onze denk- en handelwijze wordt bepaald door: ons idee van kwaliteit, een duidelijk gevoel voor precisie en de ambitie om steeds de best mogelijke oplossingen te bieden.

Hierdoor zijn we in staat om altijd in te gaan op de eisen en uitdagingen van onze klanten. Vandaag biedt Hupfer als specialist voor keukenlogistiek en sterielgoedlogistiek op maat gemaakte concepten „Made in Germany”, die steeds meer klanten overal ter wereld weten te overtuigen.





Grote kwaliteit tot in het kleinste detail

Of het nu gaat om het materiaal, de afwerking, de functionaliteit, de veiligheid, service en stipte levering: kwaliteit is ons onmiskenbare handelsmerk. Hiervoor zorgen de modernste plannings- en productietechniek, zorgvuldig geselecteerde toeleveranciers en partners en een omvattende kwaliteitszorg.

Naast alle technische innovatie zijn het vooral uitstekend opgeleide medewerkers die het gezicht van het merk Hupfer bepalen. Van de ontwikkeling tot aan de levering begeleiden ze elk product in alle aspecten met hun knowhow en ambachtelijke vakkennis.

Gecontroleerde zekerheid van begin af aan

Hupfer is als ontwikkelaar en fabrikant van medische producten volgens DIN EN ISO 13485 gecertificeerd. Daarom kunt u bij onze oplossingen vertrouwen op de hoogste standaards wat betreft functionaliteit en kwaliteit – van de techniek tot aan de service.

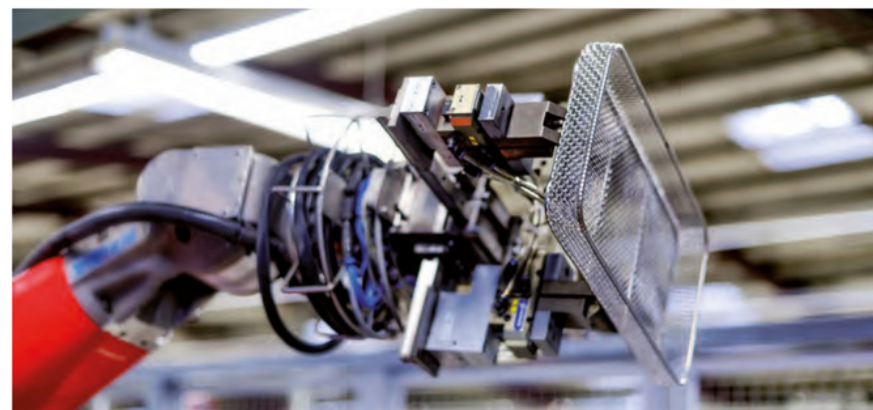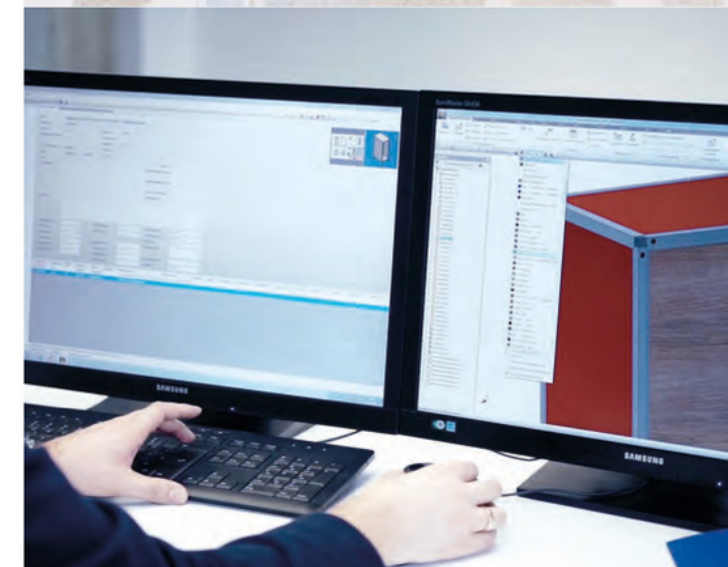

Uw partner voor innovatieve sterielgoedlogistiek




Bij Hupfer ontwikkelen wij onze producten en systemen vanuit een diepgaande kennis van logistieke structuren en individuele eisen in ziekenhuizen en medische afdelingen.

Als specialist voor sterielgoedlogistiek bieden wij omvattende oplossingen voor de toevoer en afvalverwerking van steriele goederen. Of het nu gaat om sorteren, inpakken, transporteren, opslaan of verdelen: met Hupfer optimaliseert u werkprocessen, verhoogt u de werkveiligheid en kunt u vertrouwen op de hoogste hygiënische standaards wat betreft reiniging, desinfectie en sterilisatie.

Wij ondersteunen planners, dealers en gebruikers met onze decennialange ervaring, uitgebreide branchekennis en overtuigende ideeën. Alle betrokkenen hebben de zekerheid dat de gemeenschappelijke doelen bereikt worden: veiligheid, economisch nut en echte klanttevredenheid tot aan de patiënt toe.

Altijd en overal:
maximale veiligheid en hygiëne

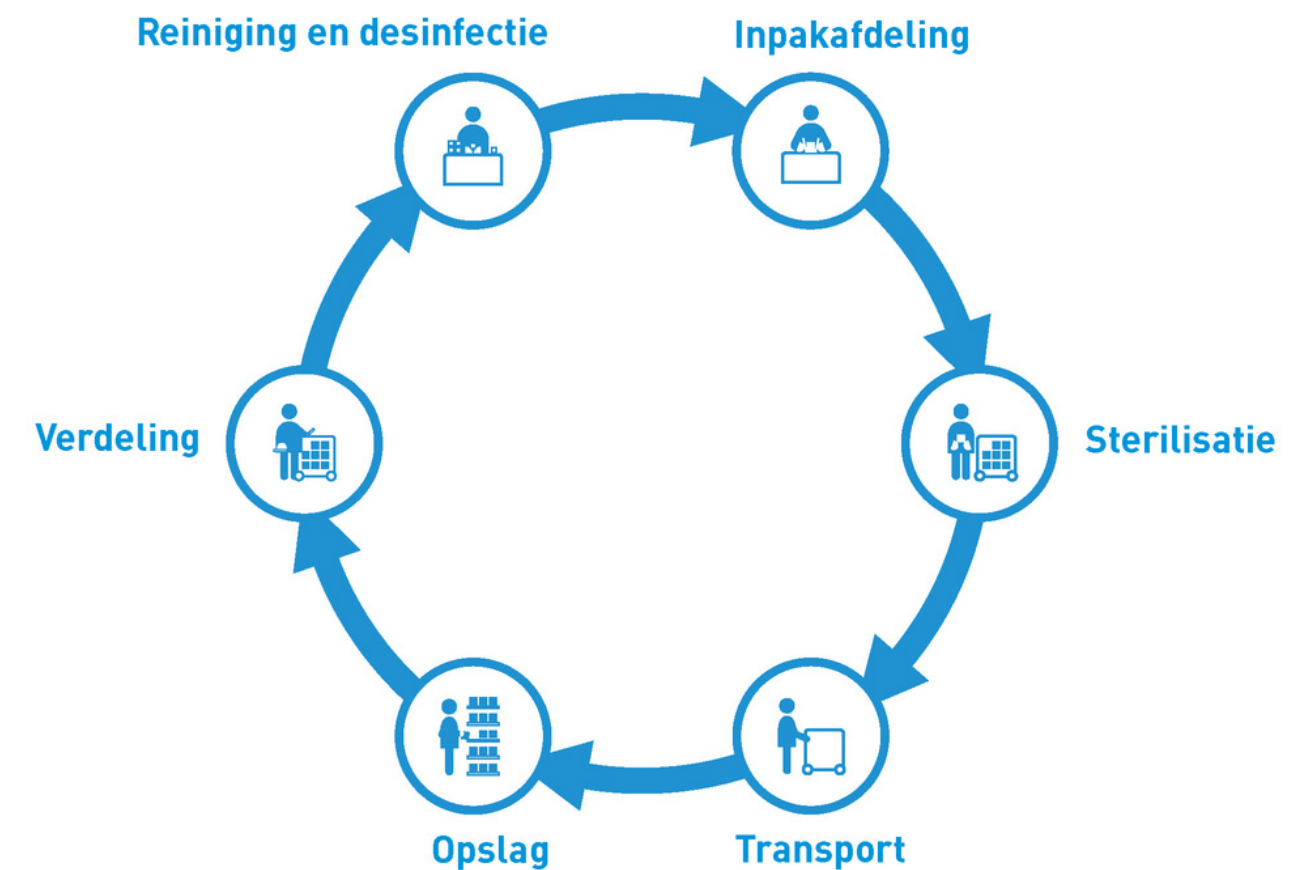

Medisch meubilair

Medisch meubilair en inrichtingsobjecten van Hupfer overtuigen door hun hoogwaardige afwerking, hun flexibiliteit en extreme belastbaarheid tijdens zwaar gebruik. Met MediFurn® omvat het productassortiment ook een generatie meubels die nieuwe maatstaven stelt op het gebied van functionaliteit, afwerking en design. Dankzij een naadloze afwerking is de reiniging eenvoudiger en bieden ze meer zekerheid op het gebied van hygiëne.





Meer hygiëne: rompen in HS-, H1- en H2-kwaliteit

Naast de tot dusver gangbare HS-hygiënestandaard zijn nu voor het eerst ook rompen met hygiënegarantie in de geoptimaliseerde hygiëne-uitvoeringen H1 en H2 volgens DIN 18865-9 leverbaar.

De nieuwe modellen zijn volledig gelast, de hoeken zijn met een verschillende straal afgerond. Het beslissende voordeel van de naadloze constructie: er zijn geen spleten meer waarin afscheidingsproducten, bloed, eiwitten of andere vloeistoffen kunnen dringen.



HYGIËNE NIVEAU H2 Bij hygiëneniveau H2 zijn de bodems en zijelementen van de rompen naadloos gelast en vormen binnenin een straal van ca. 20 mm. De extra grote radius schept de beste voorwaarden voor een bijzonder grondige reiniging en reduceert daarmee het verspreidingsrisico van ziektekiemen aanzienlijk. Daarom bieden H2-rompen ook in hygiënisch sterk belaste toepassingsgebieden een maximale veiligheid.

HYGIËNE NIVEAU H1 Bij hygiëneniveau H1 zijn de bodems en zijelementen van de rompen eveneens naadloos gelast en vormen binnenin met ca. 3 mm een kleinere straal. H1-rompen worden aanbevolen voor toepassingsgebieden met lage of gemiddelde hygiënische belastingen.

HYGIËNE NIVEAU HS Hygiëneniveau HS is tot op heden de algemeen gangbare standaard. Bij deze rompconstructie zitten er voegen tussen bodem en zij-elementen die een intensieve reiniging moeilijker maken. HS-rompen zijn daarom geschikt voor in hygiënisch opzicht niet kritische gebieden.



Steviger gaat niet: sokkel met magneetsluiting

De 100 mm hoge sokkel wordt op het draagframe vastgezet met een magneetsluiting en indien nodig in het gebouw verzegeld met een siliconennaad. Zo kan de sokkel snel worden gedemonteerd voor een onderhoudsbeurt.

Veilig en sterk: gelaste oplegpennen

Alle pennen voor de schappen sluiten dicht af zodat er geen oncontroleerbare holle ruimtes ontstaan en een veilige reiniging gegarandeerd is.

Reinigingsvriendelijk: de scharnieren

De stabiele scharnieren zijn niet in de binnendeur, maar voor een eenvoudige reiniging bovenaan de deur bevestigd.

Goed beschermd: Beugelgrepen

De grepen van lades en onderbouwkastdeuren bevinden zich binnen de stootcontour van het werkblad. Zo worden botsingen bij het passeren voorkomen.

Veilig rondom: afdichtlippen

De algehele afdichting rondom lades en deuren voorkomt het ongemerkt binnendringen van vloeistoffen en stof.



Meer kleur: nieuwe oppervlakken

Voor de uitvoering van werkbladen, afdekkingen en deuren worden bij MediFurn® naast het beproefde roestvrij staal (CNS 1.4301) ook de nieuwe Blackline-designplaten met decors in verschillende kleuren gebruikt. Het robuuste materiaal overtuigt niet alleen met de extreem sterke en duurzame oppervlakken, maar biedt met een spectrum aan aantrekkelijke kleuren individuele vormgevingsmogelijkheden. Dit vormt een welkom contrast met de nuchter-steriele rvs-optiek en biedt u de vormgevingsmogelijkheden voor een consequente implementatie van kleursystemen en designconcepten tot aan de werkplek.





MediFurn® reinigingstafels

Reinigingstafels worden hygiënisch bijzonder sterk belast. Om de hygiëneveiligheid te verhogen, voorzien wij de rompen van de MediFurn® reinigingstafels desgewenst van de hygiëneniveaus H1 of H2. Door de naadloze uitvoering worden holle ruimtes met een hoog verontreinigingsrisico vermeden en wordt de reinigingsvriendelijkheid aanzienlijk verbeterd.

De **individuele modules** (spoelkast, kast met deuren, laden etc.) zijn naar wens van de klant verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen.

Optioneel voorzien wij de reinigingstafels van de gewenste **toebehoren** zoals persluchtpistolen, sproeikoppen, spatbescherming en ultrasone bakken.




Optioneel voorzien wij de reinigingstafels van de passende toebehoren zoals persluchtpistolen, sproeikoppen, spatbescherming en ultrasone bakken.



Bakken zijn in vele dimensies en uitvoeringen leverbaar en worden naadloos in het werkblad ingezet.


Onbeperkte mogelijkheden voor veiligheid op grote schaal

Dankzij de modulaire constructie van MediFurn® meubels kunnen reinigingstafels in iedere denkbare vorm en grootte worden gerealiseerd. Zo kunnen hoge eisen aan functionaliteit en ergonomie optimaal worden gecombineerd. Reinigingsvriendelijkheid en veiligheid tot aan hygiëneniveau H2 worden door zorgvuldige afwerking en intelligente oplossingen tot in het detail bereikt.

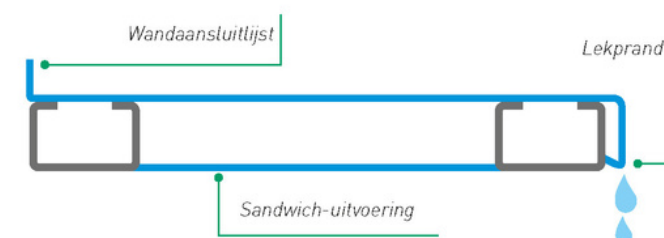


Buitenrand en druiprand


De buitenrand van het werkblad houdt uitgelopen vloeistoffen op het werkblad tegen, de druiprand verlaagt het risico zodat vloeistoffen ongecontroleerd in de binnenruimte van de kast dringen. Afdichtlippen rond deuren en lades bieden extra veiligheid.

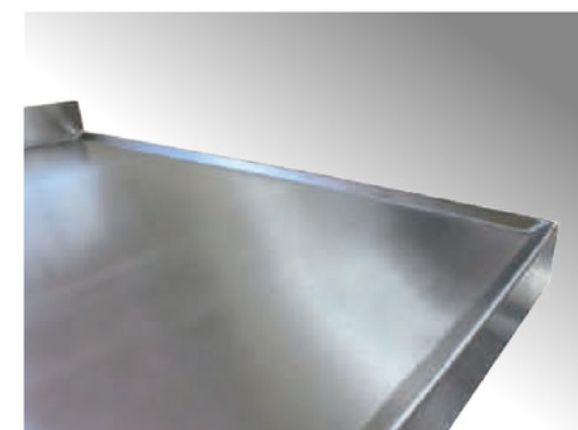

Effectieve buitenrand: Houdt vloeistoffen op het werkblad

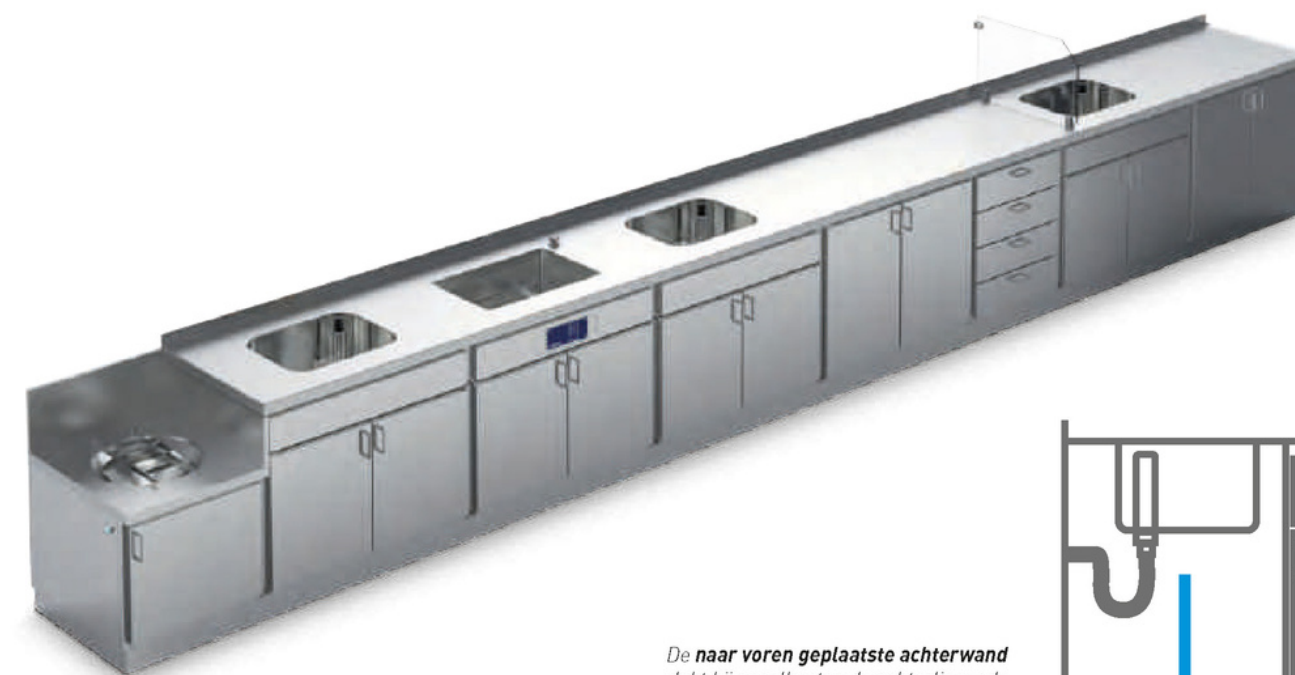

De naar voren geplaatste achterwand dekt bij spoelkasten de achterliggende installatie af en kan voor reparaties verwijderd worden.

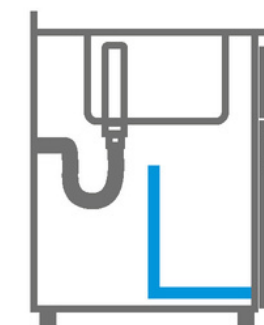



MediFurn® paktafels

Controleren, sorteren, nareinigen, inpakken – paktafels verenigen vele activiteiten op een werkplek. Daarom worden hoge eisen gesteld aan een veilige, functionele en ergonomische configuratie van de technische uitrusting.

MediFurn® paktafels zijn geheel gemaakt van roestvrij staal en zo ontworpen dat ze zonder problemen kunnen worden aangepast aan de individuele behoeftes van de medewerkers.

De tafels bieden maximale flexibiliteit bij de aansluiting op de gebouwtechniek, de in hoogte verstelbare tafels kunnen met een druk op de knop grootschalig worden ingesteld op de optimale werkhoogte. Alle technische componenten zijn zo geplaatst dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Desgewenst zijn de MediFurn® paktafels ook verkrijgbaar als verrijdbare uitvoering met wielen.

Als er extra werkoppervlak nodig is, dan is de uitschuifplank de optimale oplossing. Deze verdwijnt onder het werkblad als hij niet nodig is.



Voor de verlichting van de werkplek kunt u kiezen uit energiezuinige LED-techniek en tl-buizen met koud licht en een hoge lichtsterkte.



Via de centrale, naar keuze plafondhoge mediazuil wordt de werkplek op de lokale aansluitingen voor perslucht, elektriciteit en netwerk aangesloten. De aansluitingen zijn via de revisieklep op ieder moment toegankelijk.



De werkhoogte kan door een druk op de knop met behulp van een digitaal display tot op de centimeter over 30 cm versteld worden. Standaard leverbaar zijn de uitgangshoogtes 75 cm en 85 cm.



De volledig uitschuifbare pc-kast heeft vleugeldeuren met openingen die een effectieve ventilatie van computers en andere apparatuur met hoge warmteontwikkeling waarborgen.



Ter vermijding van „kabelchaos” kunnen alle verbindingskabels en leidingen binnen de opvanginrichting over vrijwel de hele breedte geleid worden.



De onderbouw beschikt naar keuze over een ladeblok, laden voor GN-bakken of volledig uitschuifbare laden. Optioneel zijn laden met automatische inschuifmechanismen en vleugeldeuren.



MediFurn® - hoge kasten en hangkasten

Medifurn® hoge kasten en hangkasten bieden veel ruimte voor het opbergen en opslaan van materiaal. Tegelijkertijd zorgen ze voor overzicht, zijn ze veelzijdig en probleemloos in het gebruik. Ze kunnen precies worden afgestemd op uiteenlopende goederen en zorgen op ieder moment voor een snelle en betrouwbare toegang tot materialen en instrumenten.

Ze zijn voorbereid voor het opnemen van dichte schappen of draadroosters en kunnen als alternatief ook voor het opslaan van module- of draadmanden met kunststof-inbouwwanden in StE- of ISO-formaat uitgerust worden.



Dichte schappen of draadroosters worden gebruikt voor het opslaan van de meest uiteenlopende goederen.



Voor het opbergen van modulaire korven of korven voor steriele instrumenten kunnen ook **kunststof-inbouwwanden in ISO-formaat** worden gebruikt die de hantering van de opgeslagen goederen nog gemakkelijker maken.



Blinderen, schuin en plat dak zorgen overal voor optisch zuivere aansluitingen, voorkomen stofafzettingen en maken het reinigen eenvoudiger.



Afhankelijk van de beoogde toepassing worden **lades** in verschillende dimensies geïntegreerd.



De apothekerskast die makkelijk kan worden uitgeschoven en een optimaal overzicht van de gehele inhoud biedt, is speciaal ontworpen voor het beschermd opslaan van instrumenten. Voor vele instrumenten zijn houders beschikbaar.



De kastmodules kunnen afhankelijk van het gebruiksdoel worden ingericht met Medidul-schappen voor het opnemen van draadmanden en bakken in **StE- of ISO-norm**.