



Neptun Plug

CEMENTSTOPPER

Zoekt u een eenvoudige techniek om de cementstopper aan te brengen met handzaam instrumentarium?
Wilt u gebruik maken van moderne en bewezen biomaterialen?

Dan is de Neptun Plug uw keuze! In de moderne cementeertechnologie is het gebruik van cementstoppers standaard. Resorbeerbare cementstoppers zijn hierbij de meest ideale optie. Sinds de jaren tachtig hebben resorbeerbare medullaire pluggen hun waarde bewezen in de dagelijkse praktijk. U bespaart tijd bij revisies omdat u geen stopper naar buiten hoeft te werken.

De biocementstopper Neptune Plug is gemaakt van elastische biomaterialen op gelatinebasis en wordt bij lichaamstemperatuur binnen enkele dagen gemetaboliseerd. De Neptun Plug moet net onder de punt van de prothese in de diafysaire medullaire holte worden geplaatst om te voorkomen dat het botcement verder glijdt. Tegelijkertijd dient de plug om intramedullaire druk op te bouwen bij het inbrengen van het botcement onder vacuüm en verbetert zo de cementpenetratie in het aangrenzende botbed.



Betrouwbaar



Eenvoudig in gebruik



Economisch



Tijdbesparend



Lokaal verkrijgbaar

Uw voordelen op een rij

Samenstelling

- Methylparahydroxybenzoaat
- Water
- Glycerol
- Gelatine


- Op gelatine gebaseerd elastisch biomateriaal
- Resorbeerbaar binnen enkele dagen bij lichaamstemperatuur
- Al tientallen jaren bewezen in implantatie
- Verschillende maten (8–18 mm Ø, oplopend in stappen van twee) geven u de grootst mogelijke flexibiliteit tijdens de procedure
- Gemakkelijker verwijderen van cement voor revisies

Wat klanten zeggen over de Neptun Plug:



In het Johanniter Ziekenhuis in Treuenbrietzen gebruiken we al vele jaren de resorbeerbare medullaire plug Neptun Plug van INTERATIO-MediTec voor orthopedische operaties, vooral in de endoprothese. Het huidige instrumentarium voor het aanbrengen van de stopper is gemakkelijk in gebruik en het bepalen van de juiste maat van de te gebruiken stopper is eenvoudig. Met de zes beschikbare maten van 8 tot 18 mm hebben we voldoende mogelijkheden om tot het gewenste cementeerresultaat te komen. Daarom kunnen wij u de resorbeerbare medullaire plug Neptun Plug van INTERATIO-MediTec zeker aanbevelen.

Torsten Klepzig | Hoofdarts van de kliniek voor orthopedie en reumachirurgie | Johanniter Ziekenhuis in Treuenbrietzen

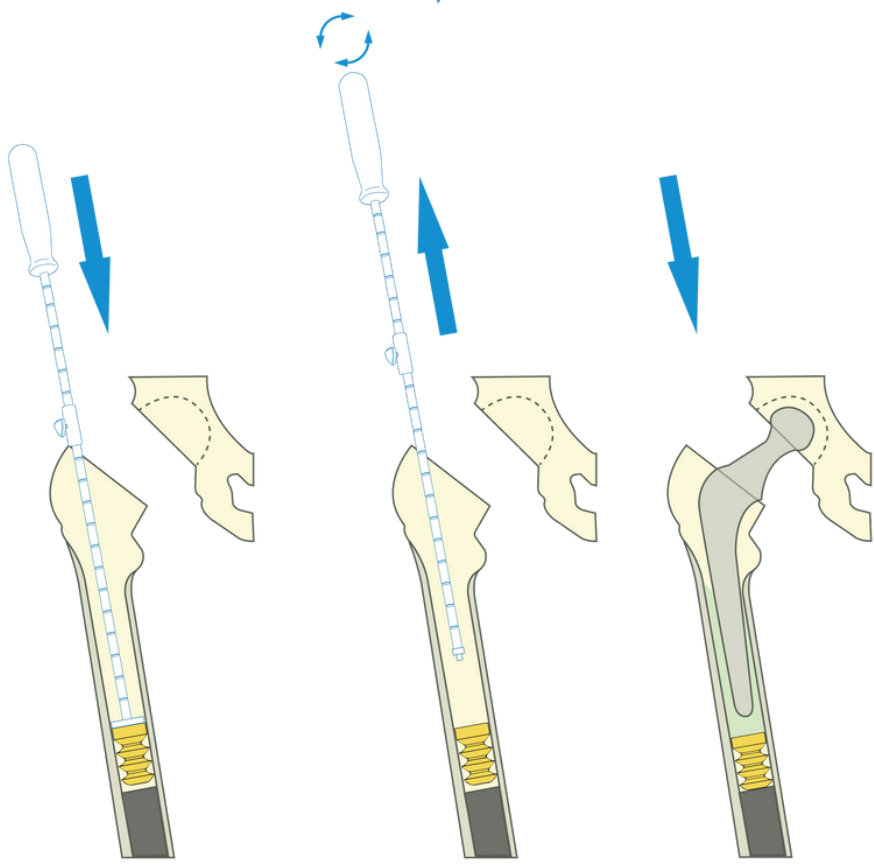



Productinformatie

Product	Inhoud per set/omschrijving	Prijs per VE	Bestelnummer
Neptun Plug	Resorbeerbare botcementstopper 8 mm	1 stuk	NP-770008
	Resorbeerbare botcementstopper 10 mm	1 stuk	NP-770010
	Resorbeerbare botcementstopper 12 mm	1 stuk	NP-770012
	Resorbeerbare botcementstopper 14 mm	1 stuk	NP-770014
	Resorbeerbare botcementstopper 16 mm	1 stuk	NP-770016
	Resorbeerbare botcementstopper 18 mm	1 stuk	NP-770018
	Inbrenginstrument voor medullaire pluggen, 3-delig, incl. referentietool met 8-18 mm Ø	1 stuk	NP-367-007



INTERATIO - MediTec
Medizintechnik Vertriebs-GmbH
Hochstraß 5
94377 Steinach

+49 9428 90190-0
info@interatio-meditec.de
www.interatio-meditec.de



Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

+31 187 470 666
info@cazandermedical.nl
www.cazandermedical.nl