



Productbrochure.

CSA CSD



© Cazander Medical, 2025

Hoewel deze brochure met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Inleiding.

Cazander Medical levert logistieke oplossingen, medisch meubilair en verbruiksgoederen aan zorginstellingen.

Zo leveren wij onder andere materialen en producten gericht op de CSA- en CSD- afdeling binnen een ziekenhuis en/of kliniek. Dit varieert van flexibele reinigingsborstels tot siliconen matten en van endoscopie ragers tot spoelkorven.

Als Cazander Medical streven wij naar het leveren van de beste kwaliteit. Op die manier kunnen we met elkaar de zorg bieden die nodig is en van ons verwacht wordt, waarbij hygiëne op nummer 1 staat.

In deze brochure presenteren wij ons aanbod voor de centrale sterilisatie afdeling en voor de centrale scopen desinfectie-afdeling. Om een duidelijk verschil te kunnen zien, hebben wij in deze brochure een onderscheid gemaakt tussen beide afdelingen.

In onze producten voor de CSA en CSD hebben wij veel diversiteit in maten en afmetingen. Om voor iedere reiniging en sterilisatie de juiste producten te kunnen bieden, beschikken wij over een breed aanbod producten. Wij kijken en denken graag met u mee, wat wij voor u en uw afdeling kunnen betekenen.

Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben en/of advies willen ontvangen? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Onze accountmanagers staan voor u klaar om met u mee te denken en te kijken op welke manier wij iets kunnen betekenen voor uw afdeling.



**De borstel verwijdt het vuil, de
biologische resten en andere
verontreinigingen op een
effectieve manier.**

Inhoud.

CSA	06
Platte borstels	08
Speciale borstels	10
Reinigingsborstels	11
Flexibele reinigingsborstels	14
Semi-flexibele reinigingsborstels	17
Borstels voor kleine kanalen	22
Levenscyclus borstels	24
Beveiligingstags	25
Siliconen matten	30
Sterilisatie & opslag	32
CSD	34
Endoscopie ragers	36
Endoscopie reinigingsborstels	52
Biopsy volve	53
Bijtblokken	54
Tipbeschermers	57
Smileyhoezen	58
Transportwagens & bakken	59
Spoelkorven	61
Cazander Medical	62

CSA.

CSA: Platte borstels.

REUSABLE: Platte borstels

Deze platte reusable borstels zijn ontworpen om chirurgische instrumenten te reinigen. De stevige borstels hebben een sterke, goede grip met een ergonomische handgreep en een lange borstelzone (70 mm). Daarnaast zijn deze borstels geschikt om in de autoclaaf te gaan om klaargemaakt te worden voor hergebruik, waarbij de handgreep is vervaardigd met gifvrije componenten.



Platte borstel - Extra hard

- Reusable: ja
- Type: extra hard
- Totale lengte: 22 cm
- Afmetingen borstel: 70 x 20 x 10 mm
- Verpakt per 5 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR22070XH



Platte borstel - Hard

- Reusable: ja
- Type: hard
- Totale lengte: 22 cm
- Afmetingen borstel: 70 x 20 x 15 mm
- Verpakt per 5 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR22070H



Platte borstel - Zacht

- Reusable: ja
- Type: zacht
- Totale lengte: 22 cm
- Afmetingen borstel: 70 x 20 x 15 mm
- Verpakt per 5 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR22070S



Platte borstel - Extra zacht

- Reusable: ja
- Type: extra zacht
- Totale lengte: 22 mm
- Afmetingen borstel: 70 x 20 x 25 mm
- Verpakt per 5 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR22070XS

Het is ook mogelijk de bovenstaande borstels te bestellen in één kit. Dit betekent dat alle vier de kleuren worden verpakt in 1 kit-set. Artikel nr. CMTE-BR22070-4.

CSA: Platte borstels.

SINGLE USE: Platte borstels

Deze platte borstels zijn ontworpen om chirurgische instrumenten schoon te maken en dienen eenmalig gebruikt te worden. De borstels hebben een sterke, goede grip met een ergonomische handgreep en een lange borstelzone (60 mm). De doorzichtige vezels maken het gemakkelijk om de reinheid van de borstels te controleren. Het handvat is vervaardigd met gifvrije componenten.



Platte borstel - Hard

- Reusable: nee
- Type: hard
- Totale lengte: 22 cm
- Afmetingen borstel: 60 x 20 x 15 mm
- Verpakt per 20 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR22060H



Platte borstel - Zacht


- Reusable: nee
- Type: zacht
- Totale lengte: 22 cm
- Afmetingen borstel: 60 x 20 x 15 mm
- Verpakt per 20 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR22060S

Let op: de afmetingen van de borstel zijn weergegeven als: l x b x h.

CSA: Tipreinigers.

SINGLE USE: Tipreinigers

Deze tipreinigers - voor eenmalig gebruik - worden gebruikt bij het verwijderen van materiaal van tips voor zowel monopolaire als bipolaire toepassingen. Deze worden niet steriel verpakt.

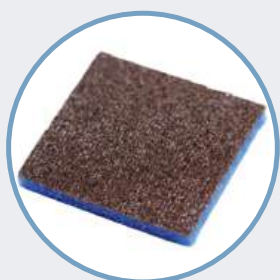

Tipreiniger

- Reusable: nee
- Latex vrij
- Radiolucent
- Afmetingen: 45 x 45 mm
- Verpakt per 60 stuks
- Artikel nr. CMTE-CLEAN

CSA: Speciale borstels.

REUSABLE: Detail borstels

Deze borstels hebben een kleinere kop met ultrastijve borstelharen en worden gebruikt om instrumenthoeken en alle getande oppervlakken te reinigen. Dankzij de kleine kop van 8 mm zorgt de borstel voor langdurige en precieze reiniging. De borstels kunnen worden hergebruikt en meerdere keren worden gesteriliseerd door middel van stoom.




Detail Borstel

- Reusable: ja
- Diameter handvat: 12 mm
- Totale lengte: 16 cm
- Afmetingen borstel: 8 x 12 x 40 mm
- Verpakt per 3 stuks
- Artikel nr. CMTE-BRPREC

Let op: deze kunnen ook per 10 besteld worden; artikel nr. CMTE-BRPREC10.

REUSABLE: Orthopedische borstels

De herbruikbare reinigingsborstels zijn vervaardigd om orthopedische materialen en andere soortgelijke instrumenten te reinigen. Deze borstels zijn voorzien van polyamide borstelharen en een ergonomische, stoombestendige, thermoplastische handgreep. Daarnaast is dit product geschikt voor langdurig gebruik, is deze latexvrij en bestand tegen vele sterilisatiecycli.

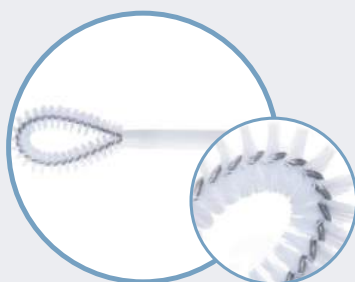

Orthopedische borstel

- Reusable: ja
- Diameter handvat: 16 mm
- Totale lengte: 23 cm
- Afmetingen borstel: 20 x 60 x 90 mm
- Verpakt per 3 stuks
- Artikel nr. CMTE-BRRAP01

Let op: de afmetingen van de borstel zijn weergegeven als: l x b x h.

Onze borstels zijn de volste op de markt en bieden de beste en veiligste reinigingskwaliteit.

CSA: Reinigingsborstels.

REUSABLE: Botfrees borstels

Wij beschikken over twee varianten reinigingsborstels voor het reinigen van een botfrees. De eerste reinigingsborstel beschikt over een borstel aan één zijde met een ronde vorm die perfect is om de binnenkant van de botfrees te reinigen. De tweede reinigingsborstel beschikt over borstels aan beide zijdes; aan de ene zijde zit een ronde borstel en aan de andere kant een taps toelopende, stijve borstel.



Botfrees borstel - Enkelzijdig

- Reusable: ja
- Totale lengte: 17 cm
- Afmetingen borstel: 18 x 50 x 45 mm
- Afmetingen handvat: 120 x 12 mm
- Verpakt per 3 stuks
- Artikel nr. CMTE-BRCOT01



Botfrees borstel - Dubbelzijdig

- Reusable: ja
- Totale lengte: 21 cm
- Afmetingen borstel 1: 18 x 50 x 45 mm
- Afmetingen borstel 2: 6/8 x 30 mm
- Afmetingen handvat: 120 x 12 mm
- Verpakt per 3 stuks
- Artikel nr. CMTE-BRCOT02

REUSABLE: Universele reinigingsborstels

Deze half stijve borstels zijn bedoeld om de meest voorkomende chirurgische instrumenten te reinigen. Door de grootte en hoeveelheid borstelharen - en de stevigheid - zijn deze geschikt voor reinigen van diverse instrumenten.



Universele reinigingsborstel

- Reusable: ja
- Kleur: zwart
- Totale lengte: 18.5 cm
- Afmetingen borstel: 125 x 38 mm
- Verpakt per 20 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR18038N

Let op: de afmetingen van de borstel zijn weergegeven als: l x b x h.

CSA: Reinigingsborstels.

REUSABLE: Dubbelzijdige reinigingsborstels

Deze dubbelzijdige borstels zorgen voor nauwkeurige reiniging dankzij de V-inkeping op de grote kop aan de ene zijde en de smalle borstel aan de andere zijde die gemakkelijk groeven en moeilijk bereikbare hoeken kan reinigen.



Dubbelzijdige reinigingsborstel

- Reusable: ja
- Totale lengte: 17.5 cm
- Afmetingen borstel 1: 10 x 38 mm
- Afmetingen borstel 2: 2 x 25 mm
- Verpakt per 20 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR18035R

REUSABLE: Container reinigingsborstels

Deze borstels zijn geschikt voor het grondig reinigen van medische containers, flessen en andere holle materialen in de CSA.



Container reinigingsborstel

- Reusable: ja
- Totale lengte: 31 cm
- Afmetingen borstel: 70 x 130 mm
- Verpakt per 3 stuks
- Artikel nr. CMTE-BR070120310



**De borstels zijn ontworpen voor ”
optimaal gebruiksgemak en voorzien
van kleurcodes om eenvoudig
onderscheid te kunnen maken tussen
de verschillende afmetingen.**



CSA: Flexibele reinigingsborstels.


Flexibele reinigingsborstels - Enkelzijdig

Binnen Cazander Medical beschikken we over een breed aanbod aan reinigingsborstels; zo ook deze flexibele variant. Wanneer de borstel door de kanalen wordt gehaald, buigt deze vrij gemakkelijk mee. Dit is zeer gunstig voor het grondig en efficiënt reinigen van de kanalen van apparatuur en holle instrumenten.

Dit model is beschikbaar in een viertal lengtes: 32, 47, 62 en 77 cm. Deze totale lengte bestaat uit de lengte van de borstel en de lengte van het handvat samen.

Diversiteit grootte borstels

De kleur van het handvat onderscheidt de grootte van de borstels. Onderstaand staat een overzicht van de verschillende kleuren met de bijbehorende diameter en lengte van de borstels.

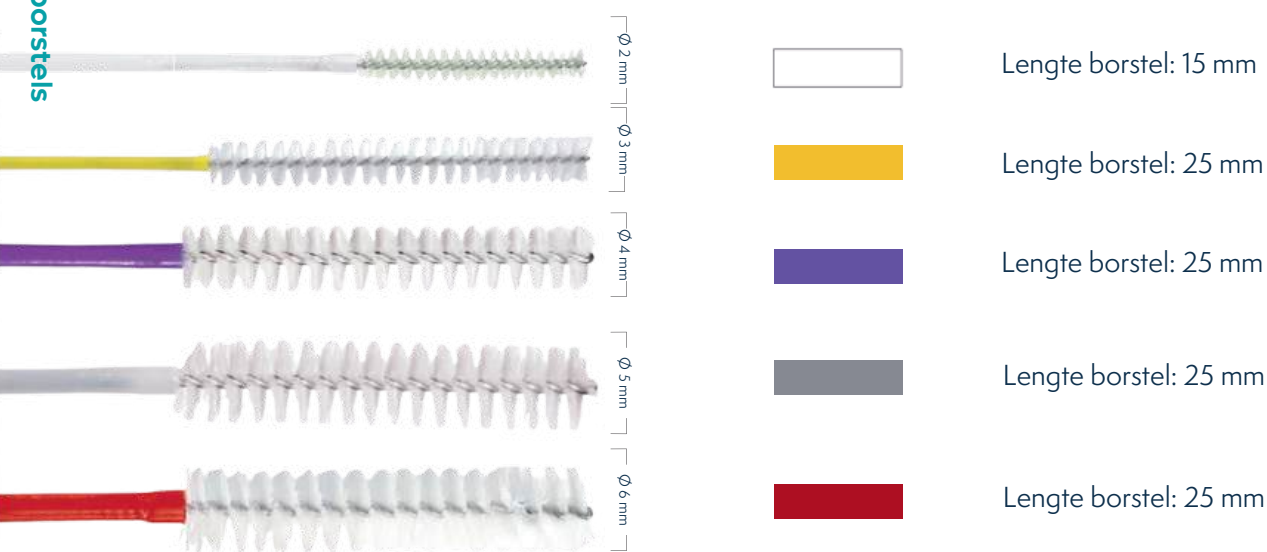

CSA: Flexibele reinigingsborstels.

REUSABLE: Flexibele reinigingsborstels - Enkelzijdig

Deze enkelzijdige, flexibele reinigingsborstels zijn beschikbaar in vele verschillende maten en afmetingen. Deze kunnen worden hergebruikt en zijn geschikt voor reiniging in de autoclaaf. Onderstaand een overzicht van de verschillende afmetingen met bijbehorende artikelnummers. De totale lengte van de borstel bestaat uit de lengte van de borstel en het handvat samen.

Totale lengte borstel: 32 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-32020R		2.0 x 15.0	1.0
CMTEP1-32030R		3.0 x 25.0	1.0
CMTEP1-32040R		4.0 x 25.0	1.7
CMTEP1-32050R		5.0 x 25.0	1.85
CMTEP1-32060R		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 47 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-47020R		2.0 x 15.0	1.0
CMTEP1-47030R		3.0 x 25.0	1.0
CMTEP1-47040R		4.0 x 25.0	1.7
CMTEP1-47050R		5.0 x 25.0	1.85
CMTEP1-47060R		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 62 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-62020R		2.0 x 15.0	1.0
CMTEP1-62030R		3.0 x 25.0	1.0
CMTEP1-62040R		4.0 x 25.0	1.7
CMTEP1-62050R		5.0 x 25.0	1.85
CMTEP1-62060R		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 77 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-77020R		2.0 x 15.0	1.0
CMTEP1-77030R		3.0 x 25.0	1.0
CMTEP1-77040R		4.0 x 25.0	1.7
CMTEP1-77050R		5.0 x 25.0	1.85
CMTEP1-77060R		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 10 stuks





Single Use

CSA: Flexibele reinigingsborstels.

SINGLE USE: Flexibele reinigingsborstels - Enkelzijdig

Deze enkelzijdige flexibele reinigingsborstels zijn single use en dienen dus na gebruik direct weggegooid te worden. Onderstaand een overzicht van de verschillende afmetingen met bijbehorende artikelnummers. De totale lengte van de borstel bestaat uit de lengte van de borstel en het handvat samen.

Totale lengte borstel: 32 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-32020		2.0 x 15.0	1.0
CMTE1-32030		3.0 x 25.0	1.0
CMTE1-32040		4.0 x 25.0	1.7
CMTE1-32050		5.0 x 25.0	1.85
CMTE1-32060		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 50 stuks

Totale lengte borstel: 47 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-47020		2.0 x 15.0	1.0
CMTE1-47030		3.0 x 25.0	1.0
CMTE1-47040		4.0 x 25.0	1.7
CMTE1-47050		5.0 x 25.0	1.85
CMTE1-47060		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 50 stuks

Totale lengte borstel: 62 cm


Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-62020		2.0 x 15.0	1.0
CMTE1-62030		3.0 x 25.0	1.0
CMTE1-62040		4.0 x 25.0	1.7
CMTE1-62050		5.0 x 25.0	1.85
CMTE1-62060		6.0 x 25.0	1.85

Verpakt per 50 stuks

Totale lengte borstel: 77 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-77020		2.0 x 15.0	1.0
CMTE1-77030		3.0 x 15.0	1.0
CMTE1-77040		4.0 x 15.0	1.7
CMTE1-77050		5.0 x 15.0	1.85
CMTE1-77060		6.0 x 15.0	1.85

Verpakt per 50 stuks

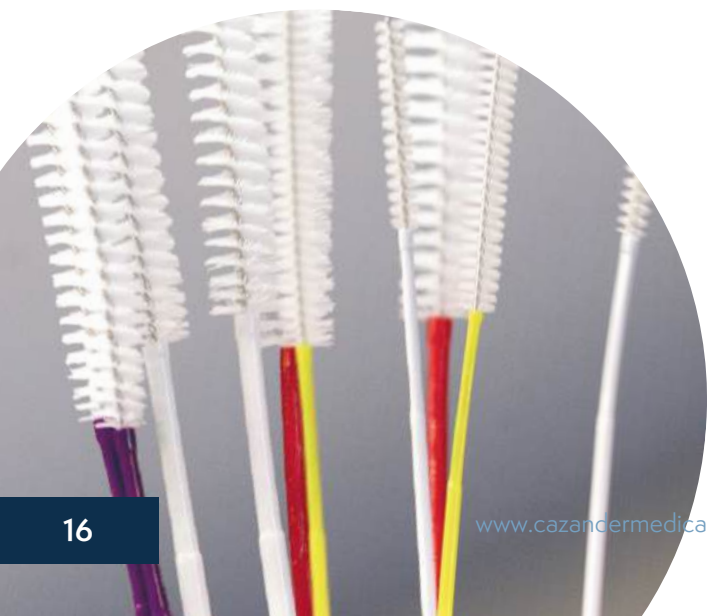

CSA: Semi-flexibele reinigingsborstels.

Semi-flexibele reinigingsborstels

Naast de flexibele reinigingsborstels zijn er ook de semi-flexibele reinigingsborstels; deze borstels zijn stijver dan de flexibele uitvoering. De borstels hebben een dikker handvat en zijn minder buigzaam en bedoeld voor grovere reiniging. Binnen deze semi-flexibele borstels is er ook onderscheid in soort borstels. Er kan keuze gemaakt worden uit de volgende type borstels: enkelzijdige borstels, symmetrische dubbelzijdige borstels en asymmetrische dubbelzijdige borstels.

	$\varnothing 5 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm
	$\varnothing 6 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm
	$\varnothing 8 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm
	$\varnothing 10 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm
	$\varnothing 12,5 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm
	$\varnothing 15 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm
	$\varnothing 20 \text{ mm}$		Lengte borstel: 50 mm



Single Use

CSA: Semi-flexibele reinigingsborstels.

SINGLE USE: Semi-flexibele reinigingsborstels - Enkelzijdig

Deze enkelzijdige semi-flexibele reinigingsborstels zijn beschikbaar in een single-use variant. Deze borstels bevatten aan één zijde een borstel. Onderstaand een overzicht van de verschillende afmetingen met bijbehorende artikelnummers. De totale lengte van de borstel bestaat uit de lengte van de borstel en het handvat samen.



Totale lengte borstel: 35 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-35050		5.0 x 50.0	3.0
CMTE1-35060		6.0 x 50.0	3.0
CMTE1-35080		8.0 x 50.0	4.0
CMTE1-35100		10.0 x 50.0	4.0
CMTE1-35120		12.5 x 50.0	4.0
CMTE1-35150		15.0 x 50.0	5.8
CMTE1-35200		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 50 stuks

Totale lengte borstel: 50 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-50050		5.0 x 50.0	3.0
CMTE1-50060		6.0 x 50.0	3.0
CMTE1-50080		8.0 x 50.0	4.0
CMTE1-50100		10.0 x 50.0	4.0
CMTE1-50120		12.5 x 50.0	4.0
CMTE1-50150		15.0 x 50.0	5.8
CMTE1-50200		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 50 stuks

Totale lengte borstel: 65 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-65050		5.0 x 50.0	3.0
CMTE1-65060		6.0 x 50.0	3.0
CMTE1-65080		8.0 x 50.0	4.0
CMTE1-65100		10.0 x 50.0	4.0
CMTE1-65120		12.5 x 50.0	4.0
CMTE1-65150		15.0 x 50.0	5.8
CMTE1-65200		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 50 stuks

Totale lengte borstel: 80 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing$ x L (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTE1-80050		5.0 x 50.0	3.0
CMTE1-80060		6.0 x 50.0	3.0
CMTE1-80080		8.0 x 50.0	4.0
CMTE1-80100		10.0 x 50.0	4.0
CMTE1-80120		12.5 x 50.0	4.0
CMTE1-80150		15.0 x 50.0	5.8
CMTE1-80200		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 50 stuks



De uiteindes van de single use varianten bevatten een opening in het handvat aan de onderzijde van de borstel.

CSA: Semi-flexibele reinigingsborstels.

REUSABLE: Semi-flexibele reinigingsborstels - Enkelzijdig

Deze reinigingsborstels bevatten aan één zijde een borstel. De onderstaande borstels zijn geschikt om meerdere malen te gebruiken, voordat deze wordt weggegooid: reusable. Onderstaand een overzicht van de verschillende afmetingen met bijbehorende artikelnummers. De totale lengte van de borstel bestaat uit de lengte van de borstel en het handvat samen.



Totale lengte borstel: 35 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-35050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-35060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-35080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-35100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-35120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP1-35150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP1-35200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 50 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-50050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-50060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-50080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-50100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-50120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP1-50150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP1-50200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 65 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-65050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-65060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-65080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-65100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-65120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP1-65150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP1-65200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 80 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel $\varnothing \times L$ (mm)	Handvat $\varnothing$ (mm)
CMTEP1-80050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-80060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP1-80080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-80100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP1-80120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP1-80150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP1-80200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

De borstels zijn ontworpen voor optimaal gebruiksgemak en voorzien van kleurcodes om eenvoudig onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende afmetingen.

CSA: Semi-flexibele reinigingsborstels.

REUSABLE: Semi-flexibele reinigingsborstels - Dubbelzijdig: symmetrisch

Deze symmetrische semi-flexibele reinigingsborstels bevatten aan beide zijdes een borstel. De borstels aan beide zijdes bevatten dezelfde grootte. Deze borstels zijn reusable en kunnen dus meerdere malen gebruikt worden, voordat deze worden weggegooid. Onderstaand een overzicht van de verschillende afmetingen met bijbehorende artikelnummers. De totale lengte van de borstel bestaat uit de borstel en het handvat samen.



Totale lengte borstel: 35 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-35050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-35060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-35080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-35100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-35120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-35150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP2-35200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 50 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-50050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-50060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-50080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-50100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-50120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-50150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP2-50200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 65 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-65050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-65060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-65080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-65100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-65120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-65150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP2-65200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 80 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-80050R		5.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-80060R		6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-80080R		8.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-80100R		10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-80120R		12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-80150R		15.0 x 50.0	5.8
CMTEP2-80200R		20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

CSA: Semi-flexibele reinigingsborstels.

REUSABLE: Semi-flexibele reinigingsborstels - Dubbelzijdig: asymmetrisch

Deze asymmetrische semi-flexibele reinigingsborstels bevatten aan beide zijdes een borstel. De borstels aan de zijdes bevatten een andere grootte. Deze borstels zijn reusable en kunnen dus meerdere malen worden gebruikt, voordat deze worden weggegooid. Onderstaand een overzicht van de verschillende afmetingen met bijbehorende artikelnummers. De totale lengte van de borstel bestaat uit de borstel en het handvat samen.



Totale lengte borstel: 35 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel 1 Ø x L (mm)	Borstel 2 Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-350506R		5.0 x 50.0	6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-350810R		8.0 x 50.0	10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-351012R		10.0 x 50.0	12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-351520R		15.0 x 50.0	20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 50 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel 1 Ø x L (mm)	Borstel 2 Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-500506R		5.0 x 50.0	6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-500810R		8.0 x 50.0	10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-501012R		10.0 x 50.0	12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-501520R		15.0 x 50.0	20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 65 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel 1 Ø x L (mm)	Borstel 2 Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-650506R		5.0 x 50.0	6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-650810R		8.0 x 50.0	10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-651012R		10.0 x 50.0	12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-651520R		15.0 x 50.0	20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

Totale lengte borstel: 80 cm

Artikel nr.	Kleur	Borstel 1 Ø x L (mm)	Borstel 2 Ø x L (mm)	Handvat Ø (mm)
CMTEP2-800506R		5.0 x 50.0	6.0 x 50.0	3.0
CMTEP2-800810R		8.0 x 50.0	10.0 x 50.0	4.0
CMTEP2-801012R		10.0 x 50.0	12.5 x 50.0	4.0
CMTEP2-801520R		15.0 x 50.0	20.0 x 50.0	5.8

Verpakt per 10 stuks

CSA: Borstels voor kleine kanalen.

Borstels voor kleine kanalen


De naam zegt het al: deze reinigingsborstels zijn bedoeld om de kleine en korte kanalen van instrumentaria te kunnen reinigen. Het feit dat deze borstels zeer kort en klein zijn, maakt dat deze speciaal zijn ontwikkeld voor de kleinste kanalen. De onderstaande borstels zijn geschikt om één dag/eenmalig te gebruiken voordat deze wordt weggegooid: single/day use.

CSA: Borstels voor kleine kanalen

		Lengte borstel: 15 mm
		Lengte borstel: 15 mm
		Lengte borstel: 20 mm
		Lengte borstel: 24 mm
		Lengte borstel: 24 mm

Wist u dat...

de uiteindes van de borstels rond zijn afgewerkt? Dit is bewust gedaan om te voorkomen dat er schade ontstaat na het gebruik van deze ragers aan het plastic of andere producten en/of materialen. De ronde afwerking zorgt dus voor een soepele en geleidelijke beweging door de kanalen.

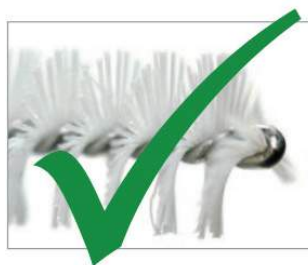

CSA: Borstels voor kleine kanalen.

SINGLE USE: Borstels voor kleine kanalen - Enkelzijdig

Deze reeks van enkelzijdige single use reinigingsborstels zijn speciaal ontwikkeld voor instrumenten met een maximale lengte van 75 cm. Deze borstels worden voornamelijk gebruikt voor het reinigen van chirurgische endoscopen of holle sterilisatiekanalen. Deze borstels zijn qua constructie identiek aan de andere reinigingsborstels en hebben gevouwen uiteinden (behalve borstels met een diameter van 1.8 mm en 2 mm) om optimale bescherming van de gereinigde kanalen te waarborgen.

Borstel Ø 1.8 mm - Voor kanalen van 1.1 - 1.5 mm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Totale lengte (cm)
CMTE-018030		1.8 x 15.0	31.5
CMTE-018055		1.8 x 15.0	56.5
CMTE-018075		1.8 x 15.0	76.5

Verpakt per 100 stuks

Borstel Ø 2.0 mm - Voor kanalen van 1.2 - 1.8 mm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Totale lengte (cm)
CMTE-02030		2.0 x 15.0	31.5
CMTE-02055		2.0 x 15.0	56.5
CMTE-02075		2.0 x 15.0	76.5

Verpakt per 100 stuks

Borstel Ø 3.0 mm - Voor kanalen van 1.8 - 2.6 mm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Totale lengte (cm)
CMTE-03030		3.0 x 20.0	32
CMTE-03055		3.0 x 20.0	57
CMTE-03075		3.0 x 20.0	77

Verpakt per 100 stuks

Borstel Ø 5.0 mm - Voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Totale lengte (cm)
CMTE-05030		5.0 x 24.0	32
CMTE-05055		5.0 x 24.0	57
CMTE-05075		5.0 x 24.0	77

Verpakt per 100 stuks

Tapered Borstel Ø 5.0/6.0 mm - Voor kanalen van 3.0 - 5.0 mm

Artikel nr.	Kleur	Borstel Ø x L (mm)	Totale lengte (cm)
CMTE-06030		5.0/6.0 x 24.0	32
CMTE-06055		5.0/6.0 x 24.0	57
CMTE-06075		5.0/6.0 x 24.0	77

Verpakt per 100 stuks

CSA: Levenscyclus borstels.

Levenscyclus van de borstels

Een borstel gemaakt van polyamide verliest na elk gebruik (mechanische werking) en na elke sterilisatieproces (thermische werking) een deel van zijn efficiëntie. Het is onrealistisch te denken dat een borstel 50 of 100 reinigings- en sterilisatiecycli kan doorstaan - ongeacht de kwaliteit van de borstel - zonder de meeste van zijn eigenschappen en krachten te verliezen. Om die redenen hebben wij gekozen om kostenefficiënte producten aan te bieden die regelmatig kunnen worden vervangen.

Onderstaand staat een overzicht dat in kaart brengt wat de levenscyclus van de borstels is.

Artikel nr.	Ø borstel	Life cycle van een borstel*
CMTEP1-XX02	2.0 mm	2 tot 3 dagen**
CMTEP1-XX03 CMTEP1-XX04 CMTEP1-XX05 (32-47-62-77)	3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm (flexibele borstel & handvat)	3 tot 8 dagen**
CMTEP1-XX05 (35-50-65-77) CMTEP1-XX06 CMTEP1-XX08 CMTEP1-XX10 CMTEP1-XX12 CMTEP1-XX15 CMTEP1-XX20 CMTEP2-XX05 CMTEP2-XX06 CMTEP2-XX08 CMTEP2-XX10 CMTEP2-XX12 CMTEP2-XX15 CMTEP2-XX20	5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.5, 15.0, 20.0 mm (semi-harde borstel & handvat)	10 tot 20 dagen**

*Onder normale omstandigheden +/- 10 gebruiksmomenten per dag (op werkdagen).

**Bij intensief dagelijks gebruik kan het efficiënter en kosteneffectiever zijn om voor de single use variant te kiezen.

Een draadborstel moet worden weggegooid wanneer:

- de dichtheid van de borstelharenaanzienlijk is verslechterd;
- de borstel herhaaldelijk is vervormd (het vaak rechtbuigen van de borstel maakt het roesvrijstalen draad kwetsbaarder);
- het omhulsel een scherpe buiging vertoont (niet te verwarren met een gebogen omhulsel, wat geen risico vormt).

Een draadborstel kan na gebruik (zie hierboven voor 'normaal' borstelgebruik) alleen worden bewaard als:

- de borstelharen er nog nieuw uitzien of als nieuw aanvoelen;
- de borstel niet meerdere keren is rechtgebogen;
- sommige draadborstels kunnen tot 8 dagen worden gebruikt voor diameters kleiner dan of gelijk aan 6 mm (flexibele borstels met een diameter van 2 tot 6 mm) en tot 30 dagen voor borstels met een diameter groter dan of gelijk aan 5 mm (sem-stijve borstels met een diameter van 5 tot 20 mm).



CSA: Beveiligingstags.

SINGLE USE: Beveiligingstags

Onze beveiligingstags zijn specifiek ontworpen voor de zorgsector, ze zijn geschikt voor de autoclaaf en worden ingezet voor het verzegelen van noodkarren, medicijncontainers en verschillende soorten containers. De zegels zijn gemakkelijk te gebruiken door de brede basis en eenvoudige bediening. De tags zijn eenvoudig te sluiten en ongevoelig voor fraude. De verzegeling kan worden verbroken door de tag licht te buigen; overigens is het na de opening niet meer mogelijk de zegel te hergebruiken. Onderstaand staat uitgelicht welke type zegels er zijn.

Beschikbare tags



Standaard



Met indicator stip



Genummerd



Met print

Standaard: de standaard tag kenmerkt zich door de gehele effen uitstraling. Er zit dus verder geen extra toevoeging op deze zegel.

Met indicator stip: deze tag kenmerkt zich door de blauwe stip in het midden van het oppervlak. Indien deze zegel door de autoclaaf is gegaan, zal deze verkleuren waardoor herkent kan worden dat de inhoud van de box steriel is.

Genummerd: de naam zegt het al, deze tag is voorzien van een nummering op de voorzijde. Hiermee kan de inhoud gecategoriseerd worden.


Met print: met het gebruik van deze tag kan de inhoud direct gekenmerkt worden. De kleuren tags bevatten een tekst. Deze zijn als volgt: sterile (blauw), repair (rood), sharpen (groen), loaner (geel), clean (wit) en discard (zwart).

Daarnaast is het ook mogelijk 'gecustomized printing' te kiezen. Hierbij kunt u een eigen opdruk bepalen die u gedrukt wilt hebben op de tag; houd hier wel rekening mee dat er maximaal 8 karakters gebruikt kunnen worden.

CSA: Beveiligingstags.


Diverse maten tags

Naast de diversiteit in het bedrukking van de tags, zit er ook verschil in de grootte van de tags. Onderstaand een overzicht van de drie beschikbare maten van de security tags. De onderstaande afbeelding laat de ware grootte van de tags zien.

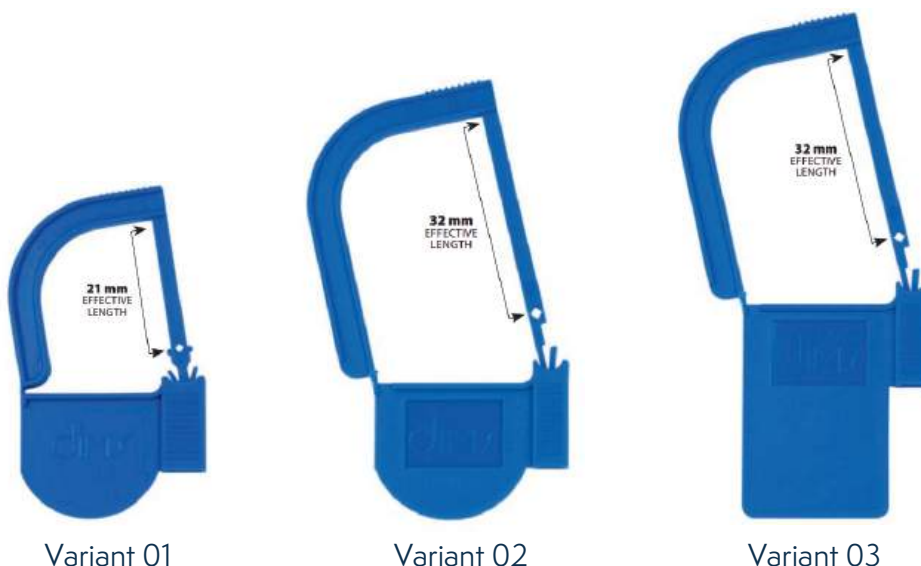

Vergrendeling tags

Variant 01 bevat een andere vergrendeling dan deze van variant 02 en variant 03. De vergrendeling van variant 01 bevat een dubbele harpoen. De andere twee tags zijn voorzien van een enkele harpoen. Zie op onderstaande afbeeldingen het verschil.

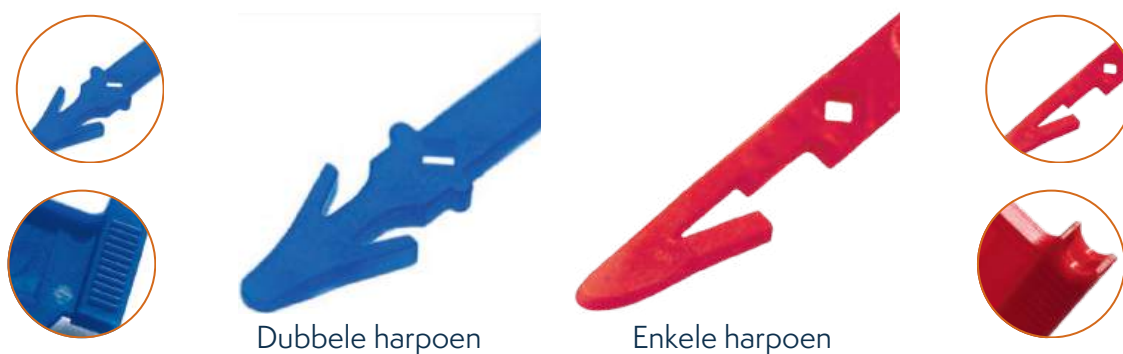

Beschikbare kleuren

De tags zijn leverbaar in 8 verschillende kleuren; onderstaand staan deze weergegeven*. Op die manier kunt u kiezen voor een kleur die bij u als ziekenhuis/instelling past.



*De tags met print zijn enkel beschikbaar in de kleuren blauw, rood, groen, geel, wit en zwart.

CSA: Beveiligingstags.

SINGLE USE: Variant 01



Standaard

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0110	Lichtblauw
CMTE-PAD0111	Blauw
CMTE-PAD0112	Rood
CMTE-PAD0113	Groen
CMTE-PAD0114	Geel
CMTE-PAD0115	Oranje
CMTE-PAD0116	Roze
CMTE-PAD0117	Wit
CMTE-PAD0118	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Met indicator stip

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0110-D	Lichtblauw
CMTE-PAD0111-D	Blauw
CMTE-PAD0112-D	Rood
CMTE-PAD0113-D	Groen
CMTE-PAD0114-D	Geel
CMTE-PAD0115-D	Oranje
CMTE-PAD0116-D	Roze
CMTE-PAD0117-D	Wit
CMTE-PAD0118-D	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Genummerd*

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0110-N	Lichtblauw
CMTE-PAD0111-N	Blauw
CMTE-PAD0112-N	Rood
CMTE-PAD0113-N	Groen
CMTE-PAD0114-N	Geel
CMTE-PAD0115-N	Oranje
CMTE-PAD0116-N	Roze
CMTE-PAD0117-N	Wit
CMTE-PAD0118-N	Zwart


Verpakt per 500 stuks

Met print*

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD111-ST	Blauw ("sterile")
CMTE-PAD112-RE	Rood ("repair")
CMTE-PAD113-SH	Groen ("shaper")
CMTE-PAD114-LO	Geel ("loner")
CMTE-PAD117-CL	Wit ("clean")
CMTE-PAD118-DI	Zwart ("discard")

Verpakt per 500 stuks

* Deze artikelen kunnen ook verpakt worden per 200 stuks. Het derde (3e) cijfer in het artikelnummer veranderd dan in een 0. Voorbeeld: het artikelnummer voor de lichtblauwe, genummerde padlocks wordt dan als volgt: CMTE-PAD0100-N.

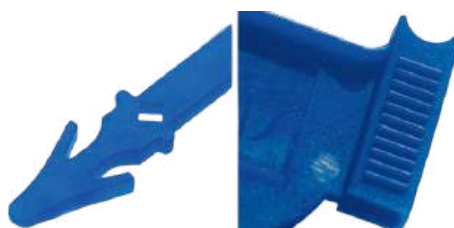



Single Use

CSA: Beveiligingstags.

SINGLE USE: Variant 02



Standaard

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0210	Lichtblauw
CMTE-PAD0211	Blauw
CMTE-PAD0212	Rood
CMTE-PAD0213	Groen
CMTE-PAD0214	Geel
CMTE-PAD0215	Oranje
CMTE-PAD0216	Roze
CMTE-PAD0217	Wit
CMTE-PAD0218	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Met indicator stip

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0210-D	Lichtblauw
CMTE-PAD0211-D	Blauw
CMTE-PAD0212-D	Rood
CMTE-PAD0213-D	Groen
CMTE-PAD0214-D	Geel
CMTE-PAD0215-D	Oranje
CMTE-PAD0216-D	Roze
CMTE-PAD0217-D	Wit
CMTE-PAD0218-D	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Genummerd*

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0210-N	Lichtblauw
CMTE-PAD0211-N	Blauw
CMTE-PAD0212-N	Rood
CMTE-PAD0213-N	Groen
CMTE-PAD0214-N	Geel
CMTE-PAD0215-N	Oranje
CMTE-PAD0216-N	Roze
CMTE-PAD0217-N	Wit
CMTE-PAD0218-N	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Met print*

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD211-ST	Blauw ("sterile")
CMTE-PAD212-RE	Rood ("repair")
CMTE-PAD213-SH	Groen ("shapen")
CMTE-PAD214-LO	Geel ("laoner")
CMTE-PAD217-CL	Wit ("clean")
CMTE-PAD218-DI	Zwart ("discard")

Verpakt per 500 stuks

* Deze artikelen kunnen ook verpakt worden per 200 stuks. Het derde (3e) cijfer in het artikelnummer veranderd dan in een 0. Voorbeeld: het artikelnummer voor de lichtblauwe, genummerde padlocks wordt dan als volgt: CMTE-PAD0200-N.



Single Use

CSA: Beveiligingstags.

SINGLE USE: Variant 03



Standaard

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0310	Lichtblauw
CMTE-PAD0311	Blauw
CMTE-PAD0312	Rood
CMTE-PAD0313	Groen
CMTE-PAD0314	Geel
CMTE-PAD0315	Oranje
CMTE-PAD0316	Roze
CMTE-PAD0317	Wit
CMTE-PAD0318	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Met indicator stip

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0310-D	Lichtblauw
CMTE-PAD0311-D	Blauw
CMTE-PAD0312-D	Rood
CMTE-PAD0313-D	Groen
CMTE-PAD0314-D	Geel
CMTE-PAD0315-D	Oranje
CMTE-PAD0316-D	Roze
CMTE-PAD0317-D	Wit
CMTE-PAD0318-D	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Genummerd*

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD0310-N	Lichtblauw
CMTE-PAD0311-N	Blauw
CMTE-PAD0312-N	Rood
CMTE-PAD0313-N	Groen
CMTE-PAD0314-N	Geel
CMTE-PAD0315-N	Oranje
CMTE-PAD0316-N	Roze
CMTE-PAD0317-N	Wit
CMTE-PAD0318-N	Zwart

Verpakt per 500 stuks

Met print*

Artikel nr.	Kleur
CMTE-PAD311-ST	Blauw ("sterile")
CMTE-PAD312-RE	Rood ("repair")
CMTE-PAD313-SH	Groen ("shapen")
CMTE-PAD314-LO	Geel ("laoner")
CMTE-PAD317-CL	Wit ("clean")
CMTE-PAD318-DI	Zwart ("discard")

Verpakt per 500 stuks


* Deze artikelen kunnen ook verpakt worden per 200 stuks. Het derde (3e) cijfer in het artikelnummer veranderd dan in een 0. Voorbeeld: het artikelnummer voor de lichtblauwe, genummerde padlocks wordt dan als volgt: CMTE-PAD0300-N.



CSA: Siliconen matten.

Siliconen matten


De siliconen matten - geschikt voor ISO draadmanden - worden voornamelijk gebruikt op de CSA en worden tussen het verpakte instrumentennet en de draadmand in gelegd. Door de uitstekende antislip eigenschappen blijft het instrumentennet op zijn plaats en beweegt deze niet. Het materiaal waar de siliconenmat van is gemaakt, is bestand tegen slijtage en tegen chemicaliën en bacteriën, wat de mat perfect geschikt maakt voor herhaald gebruik binnen de centrale sterilisatieafdeling. Daarnaast is deze mat bestemd voor temperaturen van -40 °C tot 200 °C. De siliconen matten zijn per stuk te bestellen en hebben een standaard afmeting van: 540 x 280 x 3 mm.

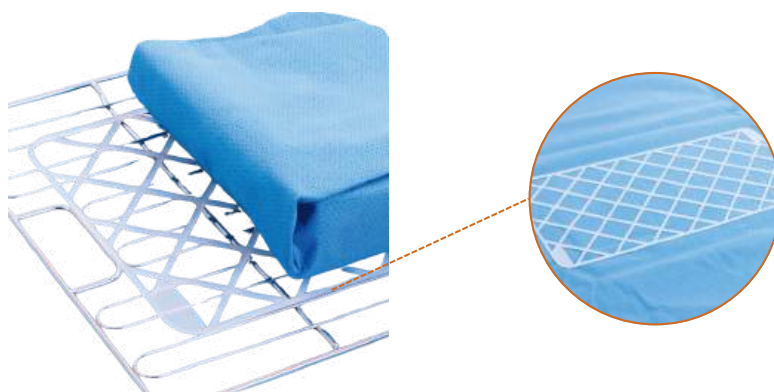

Artikel nr. per stuk: CASM-54283-WT

Siliconen matten (pinnen)

Deze siliconen matten (met pinnen) worden gebruikt om fragiele instrumenten, zoals microchirurgische of oogheekkundige instrumenten, te organiseren, plaatsen en beschermen in manden en/of dozen. De perforaties zorgen voor een goede blootstelling en ventilatie tijdens sterilisatie. De siliconen mat kan ook in kleinere stukken worden gesneden om in manden en/of dozen van elke grootte te kunnen passen. De siliconen matten zijn per stuk en vijf stuks te bestellen. De afmetingen van de mat zijn: 330 x 456 mm.

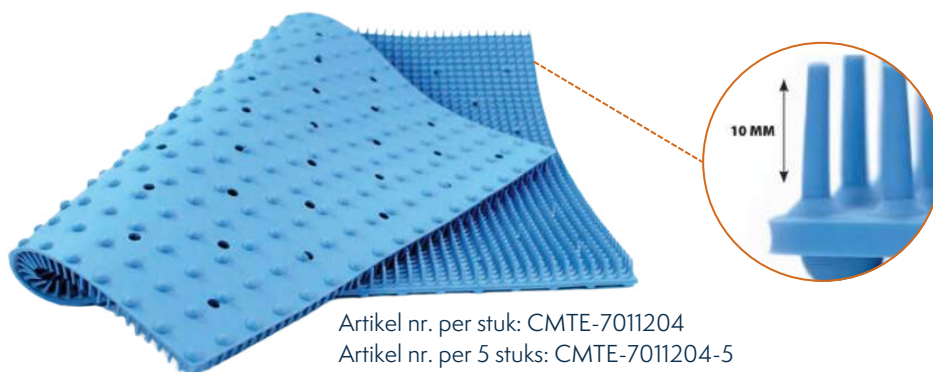


Artikel nr. per stuk: CMTE-7011204

Artikel nr. per 5 stuks: CMTE-7011204-5

CSA: Siliconen matten.

Siliconen matten (magnetisch)

De magnetische matten zijn herbruikbaar en geschikt voor de autoclaaf (tot 134 °C). Met de ingebouwde magneten houdt de magnetische mat instrumenten stevig op hun plaats. Daarnaast voorkomt de mat dat instrumenten op de grond vallen en blijven instrumenten binnen handbereik. Overigens kan de mat eenvoudig aan de muur worden gehangen dankzij de perforaties; zie onderstaande afbeelding ter verduidelijking. De siliconen matten zijn per stuk te bestellen en hebben een standaard afmeting van 295 x 375 mm.

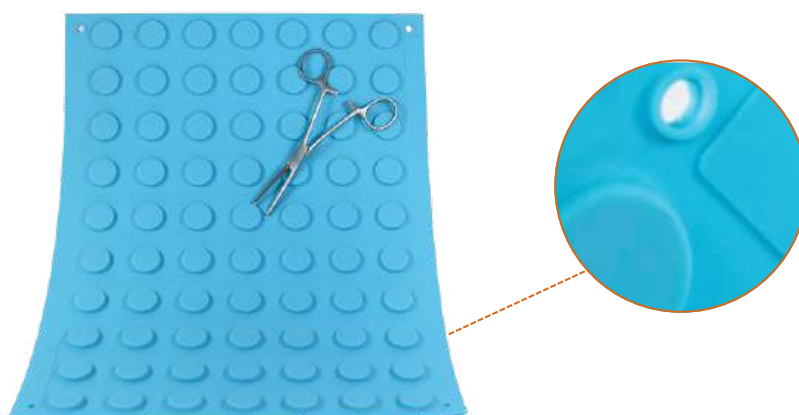


Artikel nr. per stuk: CMTE-7011601

CSA: Sterilisatie & opslag.

Draadroosters

Deze draadroosters - beschikbaar in 600 x 300 mm (din) en 600 x 400 (iso) - zijn een essentieel onderdeel voor het veilig en overzichtelijk opbergen en transporteren van medische instrumenten. Dankzij hun open structuur zorgen ze voor optimale reinigbaarheid en een efficiënte doorstroming van water en reinigingsmiddelen tijdens het sterilisatieproces. De draadroosters bevatten een speciale greepopening aan beide zijden, zijn gemaakt van RVS en zijn elektrolytisch gepolijst.

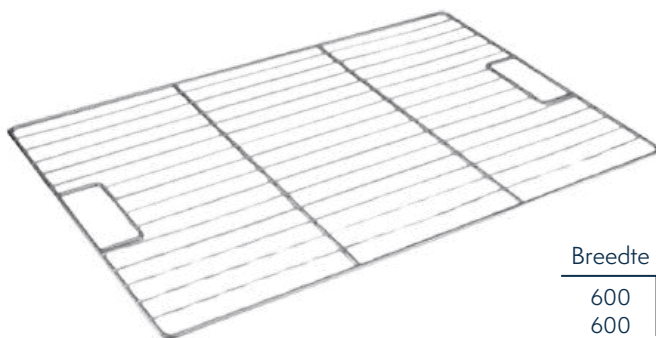

Breedte	Diepte	Artikel nr.
600	400	CAR-604015-H
600	300	CAR-603015-H

Draadmanden (ISO)

Deze draadmanden - geschikt voor iso - zijn geschikt voor wasinstallaties en voor sterilisatie. De draadmanden zijn gemaakt van hoogwaardig elektrolytisch gepolijst RVS. Dit product bevat een inschuifframe aan de bovenzijde om in L- of U-profielrails van kastinstallaties, Norm 5-Medidul-stellingen of Hupfer Känguruh-System® te schuiven. Door de speciale vormgeving aan de voorzijde kunnen de korven naar keuze in elkaar (in lege toestand, bijvoorbeeld in reinigings- en ontsmettingsapparaturen) of op elkaar (in gevulde toestand) worden gestapeld. De draadmand is beschikbaar met een enkele geleidingsrand of een dubbele geleidingsrand.



Enkele geleidingsrand



Enkele geleidingsrand

Breedte	Diepte	Hoogte	Artikel nr.	Geleidingsrand
600	400	100	CAM-604010-ER	Enkele geleidingsrand
600	400	130	CAM-604013-ER	Enkele geleidingsrand
600	400	150	CAM-604015-ER	Enkele geleidingsrand
600	400	180	CAM-604018-ER	Enkele geleidingsrand
600	400	100	CAM-604010-D	Dubbele geleidingsrand
600	400	130	CAM-604013-D	Dubbele geleidingsrand
600	400	150	CAM-604015-D	Dubbele geleidingsrand
600	400	180	CAM-604018-D	Dubbele geleidingsrand

CSA: Sterilisatie & opslag.

Mandenstapelaars

Deze mandenstapelaars zijn gemaakt van hoogwaardig RVS en heeft een zelfdragende, hygiënische constructie. De dichte bodemplaat is aan alle zijden afgeschuind voor optimale stabiliteit. Daarboven bevindt zich een gesloten veerkast met een in hoogte verstelbare, gesloten platform met een omlopende opstaande rand. De platformgeleiding is uitgerust met kogellagers. Daarnaast is de onderzijde versterkt met twee gebogen lengtebeugels van vierkante buis. Dankzij het handmatig instelbare trekverensysteem van RVS blijft de afpakhoogte constant.



Artikel nr. 7504874

Voor extra bescherming is de stapelaar voorzien van vier massieve polymeer stoothoeken. Twee daarvan, geplaatst op de bovenste corpushoeken, bevatten geïntegreerde ergonomische gevormde duwbeugels. Deze stoothoeken beschermen zowel het apparaat als de omgeving tegen beschadigingen. De stapelaar is verrijdbaar dankzij vier zwenkwielen ($\varnothing$ 125 mm), waarvan twee zijn uitgerust met blokkeerremmen. De mandenstapelaar heeft een afmeting van 802 x 715 x 899 mm (b x d x h). Het platform heeft een standaard afmeting van 383 x 580 mm. Met een laadvermogen van 120 kg is deze mandenstapelaar geschikt voor zware en efficiënte belasting.

CSD.

CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Speciale endoscopie ragers

De verschillende werkwijzen en een diversiteit aan endoscopen vraagt om verschillende type ragers. Onderstaand staan onze speciale, dubbelzijdige endoscopie ragers uitgelicht. De ragers dienen ingebracht te worden in de endoscoop en helemaal worden doorgehaald tot het andere uiteinde. Onderstaand vindt u een drietal van onze losse ragers.

Geschikt voor kanalen van Ø 2.1 - 4.5 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 5 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
230GR2	2	230

Verpakt per 800 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:




Dubbelzijdig

Endoscopie rager II: borstel Ø 5 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
230BL3	3	230

Verpakt per 800 stuks

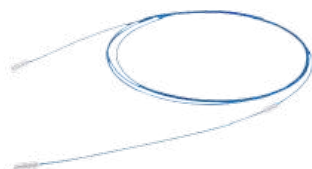

Kleur:



Beschikbaar in:



Dubbelzijdig

Geschikt voor kanalen van Ø 3.2 - 6 mm

Endoscopie rager I: borstels Ø 5 + 11 mm*

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
230WI2H	2	230

Verpakt per 300 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



Dubbelzijdig

*Deze endoscopie rager bevat een handvat van 40 mm lang bij de borstel met Ø 11 mm; zie groen gedeelte op de afbeelding.


CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Harde borstel - Ø 5 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 5 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-ENR04-100	1	100
CMTE-ENR04-180	1	180
CMTE-ENR04-200	1	200
CMTE-ENR04-230	1	230
CMTE-ENR04-300	1	300
CMTE-ENR05-100	2	100
CMTE-ENR05-180	2	180
CMTE-ENR05-200	2	200
CMTE-ENR05-230	2	230
CMTE-ENR05-300	2	300


Verpakt per 100 stuks

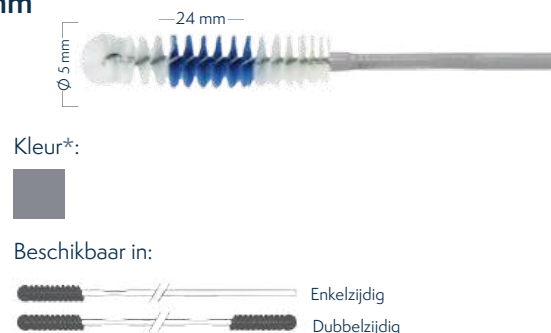

Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK04-100	1	100
CMTE-RK04-180	1	180
CMTE-RK04-200	1	200
CMTE-RK04-230	1	230
CMTE-RK04-300	1	300
CMTE-RK05-100	2	100
CMTE-RK05-180	2	180
CMTE-RK05-200	2	200
CMTE-RK05-230	2	230
CMTE-RK05-300	2	300


Verpakt per 100 stuks

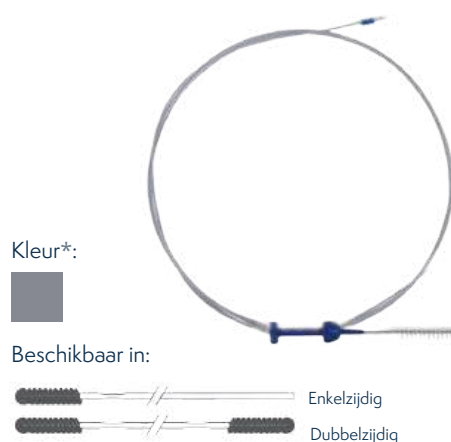

Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK204-100	1	100
CMTE-RK204-180	1	180
CMTE-RK204-200	1	200
CMTE-RK204-230	1	230
CMTE-RK204-300	1	300
CMTE-RK205-100	2	100
CMTE-RK205-180	2	180
CMTE-RK205-200	2	200
CMTE-RK205-230	2	230
CMTE-RK205-300	2	300

Verpakt per 100 stuks

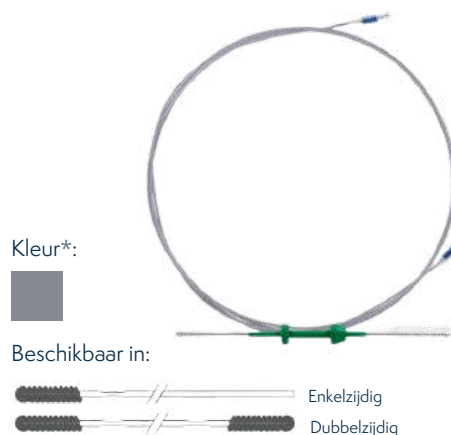

*Ook beschikbaar in de kleur geel op aanvraag.


CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Zachte borstel - Ø 5 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 5 x 24 mm (zacht) - handvat Ø 1.75 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-ENR04100S	1	100
CMTE-ENR4180S	1	180
CMTE-ENR4200S	1	200
CMTE-ENR4230S	1	230
CMTE-ENR5100S	2	100
CMTE-ENR5180S	2	180
CMTE-ENR5200S	2	200
CMTE-ENR5230S	2	230

Verpakt per 100 stuks

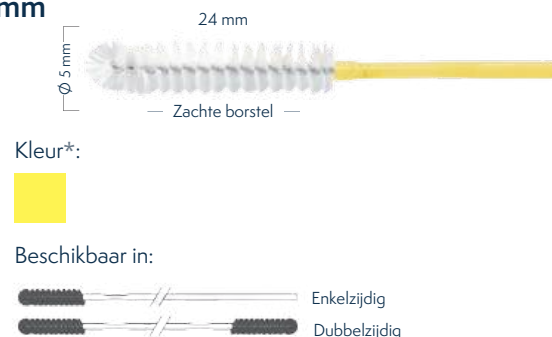

Kleur*:




Beschikbaar in:



Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (zacht) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK04-100S	1	100
CMTE-RK04-180S	1	180
CMTE-RK04-200S	1	200
CMTE-RK04-230S	1	230
CMTE-RK05-100S	2	100
CMTE-RK05-180S	2	180
CMTE-RK05-200S	2	200
CMTE-RK05-230S	2	230

Verpakt per 100 stuks

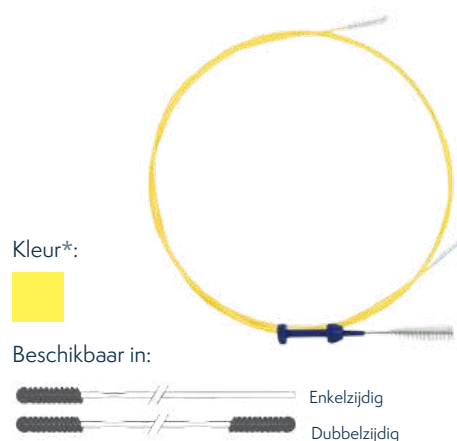

Kleur*:




Beschikbaar in:



Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (zacht) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK204100S	1	100
CMTE-RK204180S	1	180
CMTE-RK204200S	1	200
CMTE-RK204230S	1	230
CMTE-RK205100S	2	100
CMTE-RK205180S	2	180
CMTE-RK205200S	2	200
CMTE-RK205230S	2	230

Verpakt per 100 stuks

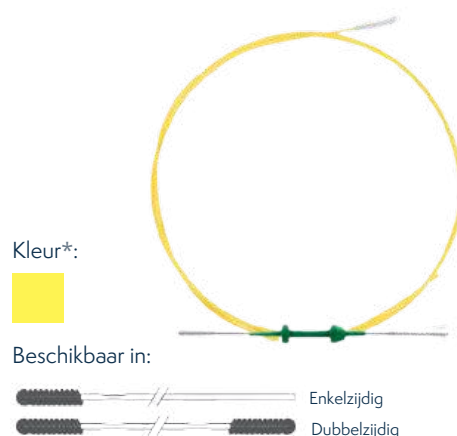

Kleur*:



Beschikbaar in:



*Ook beschikbaar in de kleur grijs op aanvraag.


CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Medium harde borstel - Ø 5 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 5 x 24 mm (medium hard) - handvat Ø 1.85 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-EN0000410	1	100
CMTE-EN0000418	1	180
CMTE-EN0000420	1	200
CMTE-EN000004	1	230
CMTE-EN0000510	2	100
CMTE-EN0000518	2	180
CMTE-EN0000520	2	200
CMTE-EN000005	2	230

Verpakt per 100 stuks

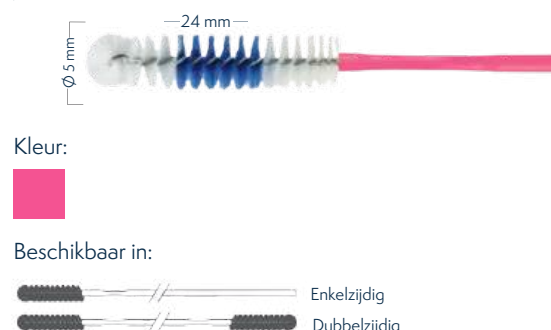

**Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (medium hard) - handvat Ø 1.85 mm)
+ 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)**

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K04-100	1	100
CMTE-K04-180	1	180
CMTE-K04-200	1	200
CMTE-K04	1	230
CMTE-K05-100	2	100
CMTE-K05-180	2	180
CMTE-K05-200	2	200
CMTE-K05	2	230


Verpakt per 100 stuks



**Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (medium hard) - handvat Ø 1.85 mm)
+ 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)**

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte in cm*
CMTE-K2-04-100	1	100
CMTE-K2-04-180	1	180
CMTE-K2-04-200	1	200
CMTE-K2-04	1	230
CMTE-K2-05-100	2	100
CMTE-K2-05-180	2	180
CMTE-K2-05-200	2	200
CMTE-K2-05	2	230

Verpakt per 100 stuks

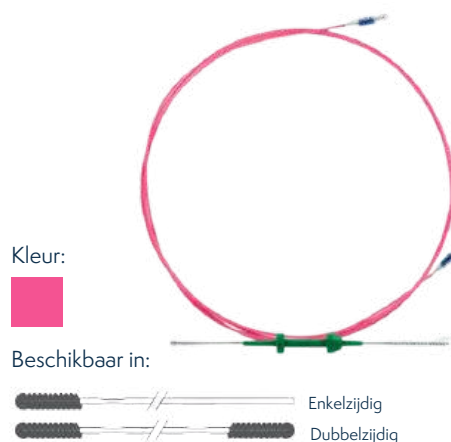


CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Zachte borstel - Ø 5 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 5 x 24 mm (zacht) - handvat Ø 1.55 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-ENR-08	1	100
CMTE-ENR06-200	1	200
CMTE-ENR06-230	1	230
CMTE-ENR07-200	2	200
CMTE-ENR07-230	2	230

Verpakt per 100 stuks

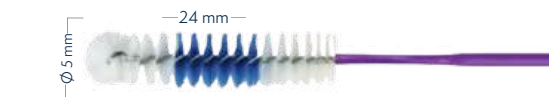

Kleur:



Beschikbaar in:



Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (zacht) - handvat Ø 1.55 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK08	1	100
CMTE-RK06-200	1	200
CMTE-RK06-230	1	230
CMTE-RK07-200	2	200
CMTE-RK07-230	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:




Beschikbaar in:



Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (zacht) - handvat Ø 1.55 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK208	1	100
CMTE-RK206-200	1	200
CMTE-RK206-230	1	230
CMTE-RK207-200	2	200
CMTE-RK207-230	2	230

Verpakt per 100 stuks

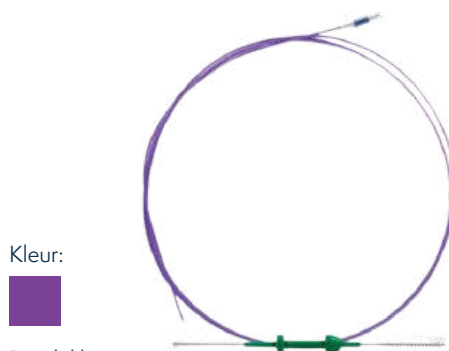

Kleur:



Beschikbaar in:



CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Flexibele borstel - Ø 5 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 5 x 24 mm (flexibel) - handvat Ø 1.70 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-EN00008	1	100
CMTE-EN00006	1	230
CMTE-EN00007	2	230

Verpakt per 100 stuks



Beschikbaar in kleur:



Beschikbaar in:



Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Kit 1: Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (flexibel) - handvat Ø 1.70 mm)

+ 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K08	1	100
CMTE-K06	1	230
CMTE-K07	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Kit 2: Endoscopie rager (borstel Ø 5 x 24 mm (flexibel) - handvat Ø 1.70 mm)

+ 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K2-08	1	100
CMTE-K2-06	1	230
CMTE-K2-07	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



Enkelzijdig

Dubbelzijdig

CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Harde borstel - Ø 5/6 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager toelopend: borstel Ø 5/6 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-ENR01-200	1	200
CMTE-ENR01-230	1	230
CMTE-ENR02-200	2	200
CMTE-ENR02-230	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur*:



Beschikbaar in:



Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Kit 1: 1 Endoscopie rager toelopend (borstel Ø 5/6 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK01-200	1	200
CMTE-RK01-230	1	230
CMTE-RK02-200	2	200
CMTE-RK02-230	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur*:



Beschikbaar in:



Enkelzijdig

Dubbelzijdig

Kit 2: 1 Endoscopie rager toelopend (borstel Ø 5/6 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK201-200	1	200
CMTE-RK201-230	1	230
CMTE-RK202-200	2	200
CMTE-RK202-230	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur*:



Beschikbaar in:



Enkelzijdig

Dubbelzijdig

*Ook beschikbaar in de kleur geel op aanvraag.

CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Standaard borstel - Ø 5/6 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm

Endoscopie rager toelopend: borstel Ø 5/6 x 24 mm (standaard) - handvat Ø 1.85 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-EN001-200	1	200
CMTE-EN00001	1	230
CMTE-EN002-200	2	200
CMTE-EN00002	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



**Kit 1: 1 Endoscopie rager toelopend (borstel Ø 5/6 x 24 mm (standaard) - handvat Ø 1.85 mm)
+ 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)**

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K01-200	1	200
CMTE-K01	1	230
CMTE-K02-200	2	200
CMTE-K02	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



**Kit 2: 1 Endoscopie rager toelopend (borstel Ø 5/6 x 24 mm (standaard) - handvat Ø 1.85 mm)
+ 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)**

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K2-01-200	1	200
CMTE-K2-01	1	230
CMTE-K2-02-200	2	200
CMTE-K2-02	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Harde borstel - Ø 6.5 mm - Geschikt voor kanalen van 2.8 - 5.0 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 6.5 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-EN065201R	1	200
CMTE-EN065231R	1	230
CMTE-EN065202R	2	200
CMTE-EN065232R	2	230


Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:

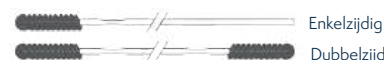

Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 6.5 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-065201R1	1	200
CMTE-065231R1	1	230
CMTE-065202R1	2	200
CMTE-065232R1	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 6.5 x 24 mm (hard) - handvat Ø 1.75 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-065201R2	1	200
CMTE-065231R2	1	230
CMTE-065202R2	2	200
CMTE-065232R2	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:



CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Medium harde borstel - Ø 3 mm - Geschikt voor kanalen van 1.8 - 2.8 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 3 x 20 mm (medium hard) - handvat Ø 1.70

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-EN00013	1	100
CMTE-EN00011	1	180
CMTE-EN00009	1	230
CMTE-EN00014	2	100
CMTE-EN00012	2	180
CMTE-EN00010	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:




Beschikbaar in:



Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 3 x 20 mm (medium hard) - handvat Ø 1.70) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K13	1	100
CMTE-K11	1	180
CMTE-K09	1	230
CMTE-K14	2	100
CMTE-K12	2	180
CMTE-K10	2	230

Verpakt per 100 stuks

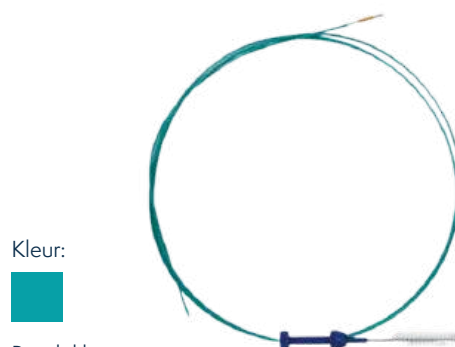

Kleur:



Beschikbaar in:



Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 3 x 20 mm (medium hard) - handvat Ø 1.70) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K2-13	1	100
CMTE-K2-11	1	180
CMTE-K2-09	1	230
CMTE-K2-14	1	100
CMTE-K2-12	1	180
CMTE-K2-10	2	230

Verpakt per 100 stuks



Kleur:



Beschikbaar in:




CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Harde borstel - Ø 3 mm - Geschikt voor kanalen van 1.8 - 2.8 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 3 x 20 mm (hard) - handvat Ø 1.55 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-ENR09-075	1	75
CMTE-ENR13	1	100
CMTE-ENR11	1	180
CMTE-ENR09-200	1	200
CMTE-ENR09-230	1	230
CMTE-ENR14	2	100
CMTE-ENR12	2	180
CMTE-ENR10-200	2	200
CMTE-ENR10-230	2	230


Verpakt per 100 stuks

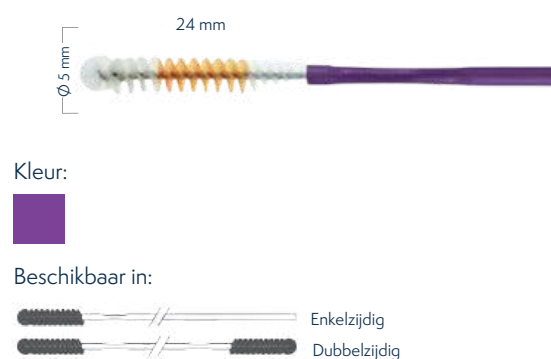

Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 3 x 20 mm (hard) - handvat Ø 1.55 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK13	1	100
CMTE-RK11	1	180
CMTE-RK09-200	1	200
CMTE-RK09-230	1	230
CMTE-RK14	2	100
CMTE-RK12	2	180
CMTE-RK10-200	2	200
CMTE-RK10-230	2	230


Verpakt per 100 stuks

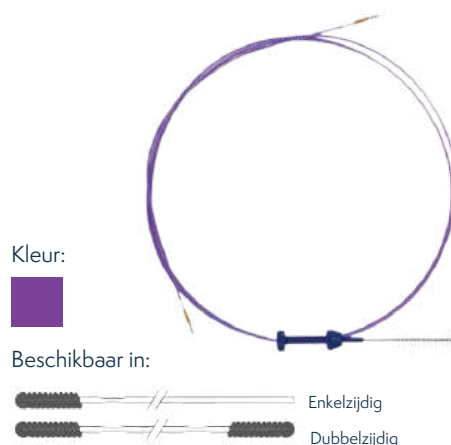

Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 3 x 20 mm (hard) - handvat Ø 1.55 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-RK213	1	100
CMTE-RK211	1	180
CMTE-RK209-200	1	200
CMTE-RK209-230	1	230
CMTE-RK214	2	100
CMTE-RK212	2	180
CMTE-RK210-200	2	200
CMTE-RK210-230	2	230

Verpakt per 100 stuks

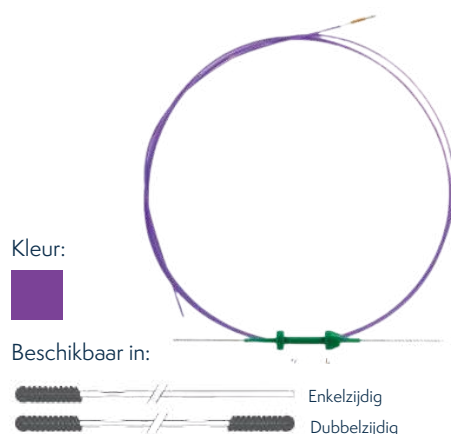

CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Standaard borstel - Ø 2 mm - Geschikt voor kanalen van 1.2 - 1.8 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 2 x 15 mm (standaard) - handvat Ø 1 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-02075	1	75
CMTE-02100	1	100
CMTE-02150	1	150
CMTE-02180	1	180
CMTE-02200	1	200
CMTE-02230	1	230
CMTE-02360	1	360
CMTE-02450	1	450
CMTE-02100-2	2	100


Verpakt per 100 stuks



Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 2 x 15 mm (standaard) - handvat Ø 1 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (enkelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K2-02075	1	75
CMTE-K2-02100	1	100
CMTE-K2-02150	1	150
CMTE-K2-02180	1	180
CMTE-K2-02200	1	200
CMTE-K2-02230	1	230
CMTE-K2-02360	1	360
CMTE-K2-02450	1	450
CMTE-K2-021002	2	100

Verpakt per 100 stuks

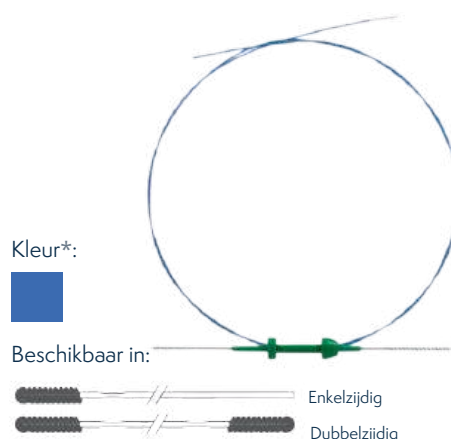

*Ook beschikbaar in de kleur geel op aanvraag.



Single Use


CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Standaard borstel - Ø 2.5 mm - Geschikt voor kanalen van 1.2 - 2.0 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 2 x 15 mm (standaard) - handvat Ø 1 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-EN015-100	1	100
CMTE-EN015-180	1	180
CMTE-EN015-200	1	200
CMTE-EN015	1	230
CMTE-EN015-360	1	360
CMTE-EN015-450	1	450

Verpakt per 100 stuks

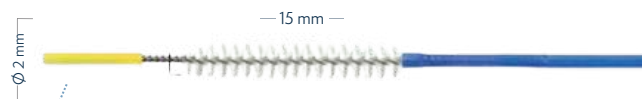

Kleur*:




Beschikbaar in:



Enkelzijdig

*Ook beschikbaar in de kleur geel op aanvraag.

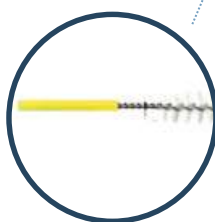

**Door 100% van de producten in eigen
fabriek te produceren en door de
vermindering van afval en plastic, blijft
de impact op het milieu beperkt in
vergelijking met producten die ver
buiten Europa worden geproduceerd.**

CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Standaard borstel - Ø 1.8 mm - Geschikt voor kanalen van 1.1 - 1.5 mm

Endoscopie rager: borstel Ø 1.8 x 15 mm (standaard)- handvat Ø 0.93 mm

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-018075	1	75
CMTE-018100	1	100
CMTE-018100-2	2	100

Verpakt per 100 stuks



Kleur:




Beschikbaar in:



Kit 1: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 1.8 x 15 mm (standaard)- handvat Ø 0.93 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 11 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K218075	1	75
CMTE-K218100	1	100
CMTE-K218100-2	2	100

Verpakt per 100 stuks

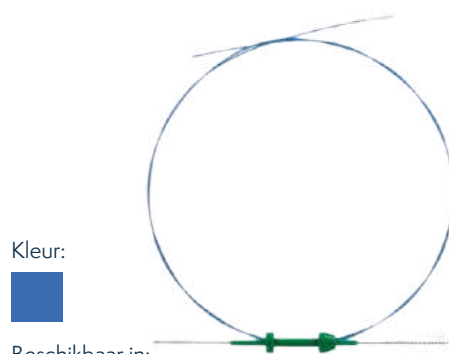

Kleur:




Beschikbaar in:



Kit 2: 1 Endoscopie rager (borstel Ø 1.8 x 15 mm (standaard)- handvat Ø 0.93 mm) + 1 Reinigingsborstel Ø 5 + 7 mm (dubbelzijdig)

Artikel nr.	Aantal borstels	Lengte (cm)
CMTE-K318100	1	100
CMTE-K318100-2	2	100

Verpakt per 100 stuks

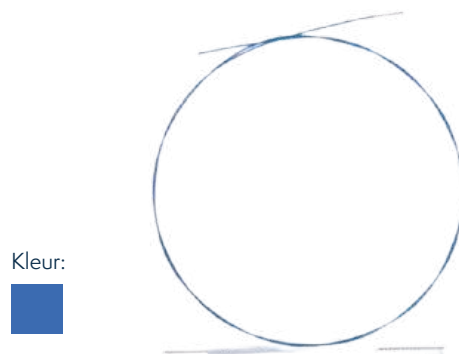

Kleur:




Beschikbaar in:



CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Kit voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm + kanalen van 1.2 - 1.8 mm

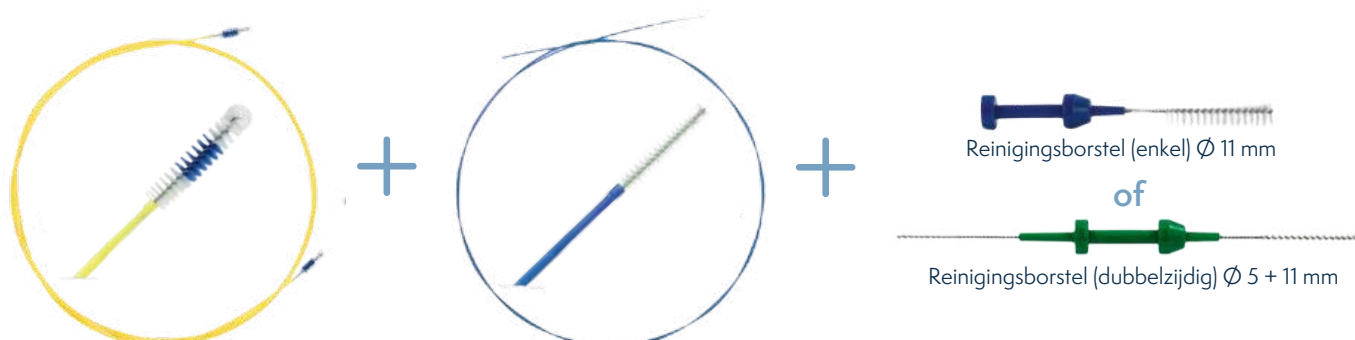

Endoscopie rager 1:
Geschikt voor kanalen van 2.8 - 4.2 mm
Borstel Ø 5 mm + Handvat Ø 1.75 mm
Totale lengte: 200 cm of 230 cm

Beschikbaar in kleuren:



Beschikbaar in:



Endoscopie rager 2:
Geschikt voor kanalen van 1.2 - 1.8 mm
Borstel Ø 2 mm + Handvat Ø 1.00 mm
Totale lengte: 200 cm of 230 cm



Kit 1: Endoscopie rager 1 van 200 cm + Endoscopie rager 2 van 200 cm (+ 1 Reinigingsborstel)

Artikel nr.	Endoscopie rager 1 (200 cm x Ø 1.75 x Ø 5 mm)	Endoscopie rager 2 (200 cm x Ø 1.00 x Ø 2 mm)	Reinigingsborstel
CMTE-RK15200SB	1	1	-
CMTE-RK16200SB	2	1	-
CMTE-RK15200	1	1	Single
CMTE-RK16200	2	1	Single
CMTE-RK215200	1	1	Double
CMTE-RK216200	2	1	Double

Verpakt per 100 stuks


Kit 2: Endoscopie rager 1 van 230 cm + Endoscopie rager 2 van 230 cm (+ 1 Reinigingsborstel)

Artikel nr.	Endoscopie rager 1 (230 cm x Ø 1.75 mm)	Endoscopie rager 2 (230 cm x Ø 1.00 mm)	Reinigingsborstel
CMTE-RK15SB	1	1	-
CMTE-RK16SB	2	1	-
CMTE-RK15	1	1	Single
CMTE-RK16	2	1	Single
CMTE-RK215	1	1	Double
CMTE-RK216	2	1	Double

Verpakt per 100 stuks

CSD: Endoscopie ragers.

SINGLE USE: Kit voor kanalen van 1.8 - 2.8 mm + kanalen van 1.2 - 1.8 mm

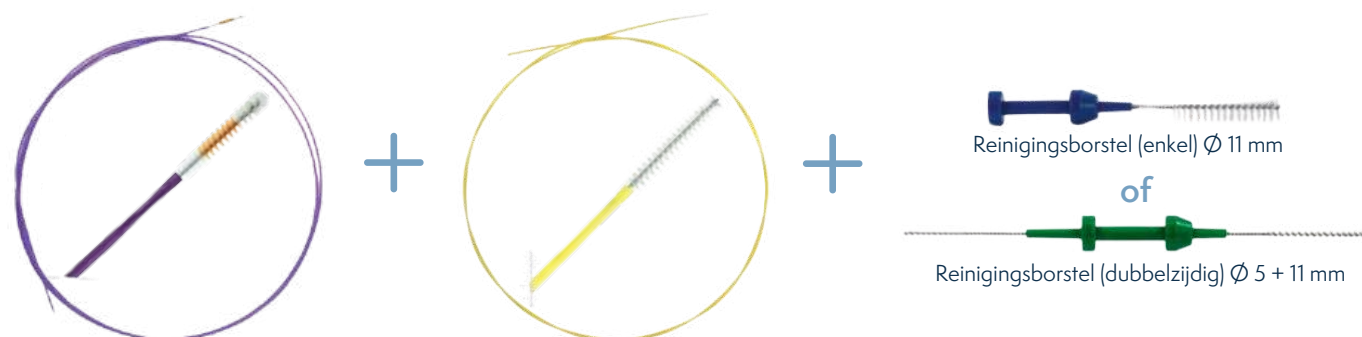

Endoscopie rager 1:
Geschikt voor kanalen van 1.8 - 2.8 mm
Borstel Ø 3 mm + Handvat Ø 1.55 mm
Totale lengte: 180 cm

Endoscopie rager 2:
Geschikt voor kanalen van 1.2 - 1.8 mm
Borstel Ø 2 mm + Handvat Ø 1.00 mm
Totale lengte: 180 cm

Beschikbaar in:



Kit 1: Endoscopie rager 1 + Endoscopie rager 2 (+ 1 Reinigingsborstel)

Artikel nr.	Endoscopie rager 1 (180 cm x Ø 1.55 x Ø 3 mm)	Endoscopie rager 2 (180 cm x Ø 1 x Ø 2 mm)	Reinigingsborstel
CMTE-RK17SB	1	1	-
CMTE-RK18SB	2	1	-
CMTE-RK17	1	1	Single
CMTE-RK18	2	1	Single
CMTE-RK217	1	1	Double
CMTE-RK218	2	1	Double

Verpakt per 100 stuks


CSD: Endoscopie reinigingsborstels.

SINGLE USE: Endoscopie reinigingsborstels




Reinigingsborstel - Enkelzijdig

- Reusable: nee
- Ø Borstel: 11 mm
- Lengte borstel: 35 mm
- Totale lengte: 10.5 cm
- Verpakt per 100 stuks
- Artikel nr. CMTE-EN00000

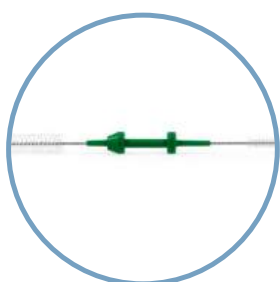

Reinigingsborstel - Dubbelzijdig

- Reusable: nee
- Ø Borstels: 5 / 11 mm
- Lengte borstels: 20 / 35 mm
- Totale lengte: 17 cm
- Verpakt per 100 stuks
- Artikel nr. CMTE-EN00000-2G

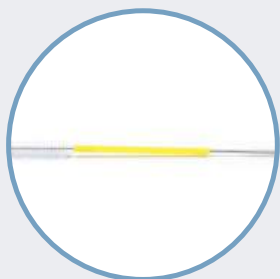

Reinigingsborstel II - Dubbelzijdig

- Reusable: nee
- Ø Borstels: 5 / 11 mm
- Lengte borstels: 35 / 20 mm
- Totale lengte: 15 cm
- Verpakt per 100 stuks
- Artikel nr. .CMTE-00000-2



Reinigingsborstel small - Dubbelzijdig

- Reusable: nee
- Ø Borstels: 5 / 7 mm
- Lengte borstels: 20 x 35 mm
- Totale lengte: 13.5 cm
- Verpakt per 100 stuks
- Artikel nr. CMTE-00000-3



Reinigingsborstel III - Dubbelzijdig

- Reusable: nee
- Ø Borstels: 5 / 10 mm
- Totale lengte: 15 cm
- Verpakt per 800 stuks
- Artikel nr. CM15

CSD: Biopsy valve.

SINGLE USE: Biopsy valve

De disposable biopsy valves helpen de zorg voor de patiënt te verbeteren door het risico op kruisbesmetting zo veel mogelijk weg te halen. De biopsy valves zijn gemaakt van flexibel thermoplastisch materiaal en worden onsteriel per stuk verpakt in afzonderlijke zakjes.



Artikel nr. CMTE-ENCAP-02



Artikel nr. CMTE-ENCAP-01

De biopsy valves zijn beschikbaar in zowel blauw als roze. De kleur hangt samen met het type endoscoop waar dit product voor gebruikt wordt. De blauwe valves zijn geschikt voor de Olympus® / Fujinon® endoscopen. De roze valves zijn geschikt voor de Pentax® endoscopen.

De beschermers bieden het volgende:

- gemakkelijke toegang tot de instrumentenkanaalpoort;
- verminderen vloeistoflekages tijdens het uitvoeren van biopsieën;
- elimineren de noodzaak van herverwerking van kleppen;
- verminderen het risico op kruisbesmetting.

CSD: Bijtblokken.

SINGLE USE: Bijtblokken

Bijtblokken worden gebruikt om de mond van de patiënt open te houden tijdens de uitvoeringen van onderzoeken en/of operaties. Om voor iedereen een product te kunnen bieden die aansluit op de wensen en behoeften, beschikken wij over diverse varianten: met of zonder zuurstofkanalen, met of zonder bandjes en voor eenmalig gebruik of voor hergebruik.

Alle bijtblokken zijn gegarandeerd latexvrij, DEHP- en BPA-vrij en vervaardigd van medische kwaliteit kunststof. Daarnaast wordt elk bijtblok verpakt met een traceerbaarheidslabel en is gemakkelijk te openen.

Onderstaand staan de diverse varianten van de bijtblokken weergegeven.



SINGLE USE: Zuurstof-bijtblokken I

Deze single use zuurstof-bijtblokken worden gebruikt om de mond van de patiënt open te houden tijdens bovenste endoscopieprocedures, zoals gastroscopie en duodenoscopie. Het bijtblok beschermt zowel de tanden van de patiënt als de endoscoop tijdens het passeren door de mond, terwijl het zorgt voor zuurstoftoevoer via de neus en mond.



Artikel nr.	Type product
ENCDOXY-WS	Oxygen bijblok I - zonder band
ENCDOXY	Oxygen bijblok I - met band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los)
Verpakt per 100 stuks	

CSD: Bijtblokken.

SINGLE USE: Standaard bijtblokken I

Deze single use bijtblokken zijn ontworpen voor de morfologie van volwassenen. Deze hebben grote en flexibele zijvleugels die comfortabel zijn voor de patiënt. De brede opening stelt de arts en/of behandelaar in staat om gemakkelijk een vinger in te brengen om de endoscoop te begeleiden. De bijtblokken worden geleverd met of zonder een verstelbare en verwijderbare band.



Artikel nr.	Type product
CMTE-ENC03-WS	Standaard bijtblok I - zonder band
CMTE-ENC03	Standaard bijtblok I - met band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los)
Verpakt per 100 stuks	

SINGLE USE: Standaard bijtblokken II



Artikel nr.	Type product
CMTE-ENC01	Standaard bijtblok II - zonder band
CMTE-ENC01S	Standaard bijtblok II - met band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los)
Verpakt per 100 stuks	

SINGLE USE: Bijtblokken (small)

Deze bijtblokken (small) zijn gemaakt voor de morfologie van kinderen of voor volwassen met een beperkte mondopening. De single use bijtblokken hebben grote en flexibele zijopeningen die comfortabel zijn voor de patiënt. De brede opening stelt de behandelaar in staat om gemakkelijk een vinger in te brengen om de endoscoop te begeleiden. Het bijtblok wordt verpakt met of zonder een verstelbare, verwijderbare band. De band is standaard aan één zijde van het bijtblok bevestigd.



Artikel nr.	Type product
CMTE-ENC03-WS	Bijtblok small - zonder band
CMTE-ENC04	Bijtblok small - met band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los)
Verpakt per 100 stuks	

Artikel nr.	Type product
CMTE-ENC04WS20	Bijtblok small - zonder band
CMTE-ENC04-20	Bijtblok small - met band
Verpakt per 20 stuks	

CSD: Bijtblokken.

REUSABLE: Zuurstof-bijtblokken II

Deze reusable zuurstof-bijtblokken worden gebruikt om de mond van patiënten open te houden tijdens bovenste endoscopie procedures zoals gastroscopie, duodendoscopie en andere onderzoeken. De bijtblokken beschermen de tanden van de patiënt, evenals de endoscoop terwijl deze door de mond gaat en zorgt daarbij voor zuurstofafvoer via de neus en mond.



Artikel nr.	Type product
CMTE-ENCDOXYR	Oxygen bijtblok II - zonder band
CMTE-ENCDOXYRS	Oxygen bijtblok II - met band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los) - Verpakt per 100 stuks
Verpakt per 20 stuks	

REUSABLE: Bijtblok I



Artikel nr.	Type product
CMTE-ENCDO01R	Bijtblok I - zonder band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los) - Verpakt per 100 stuks
Verpakt per 20 stuks	

REUSABLE: Bijtblok II




Artikel nr.	Type product
CMTE-ENCDO1RS	Bijtblok II - zonder band
CMTE-ENCDS	Elastieke band (los) - Verpakt per 100 stuks
Verpakt per 20 stuks	

CSD: Tipbeschermers.

SINGLE USE: Tipbeschermers

Alle varianten tipbeschermers - zie onderstaand - zijn geschikt voor alle maten endoscopen en zijn een vochtdoorlatend- en opnemend type en beschermen de endoscopen.

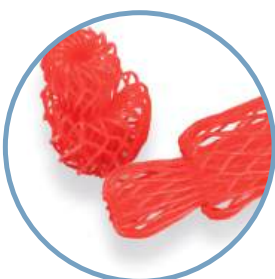

Tip beschermmer 1.1

- Steriel: nee
- Maat: Small
- Materiaal: draad
- Kleur: rood
- Per 800 stuks verpakt
- Artikel nr: TIPROS



Tip beschermmer 1.2

- Steriel: nee
- Maat: Medium
- Materiaal: draad
- Kleur: blauw
- Per 800 stuks verpakt
- Artikel nr: TIPBLW



Tip beschermmer 2.1

- Steriel: nee
- Maat: Small
- Materiaal: spons
- Kleur: rood
- Per 800 stuks verpakt
- Artikel nr: TIPROSS



Tip beschermmer 2.2

- Steriel: nee
- Maat: Medium
- Materiaal: spons
- Kleur: blauw
- Per 800 stuks verpakt
- Artikel nr: TIPBLMS



Tip beschermmer 2.3

- Steriel: nee
- Maat: Large
- Materiaal: spons
- Kleur: wit
- Per 800 stuks verpakt
- Artikel nr: TIPWILS

CSD: Smileyhoezen.

SINGLE USE: Smileyhoezen

Voor het veilig transporteren van uw scopen hebben wij verschillende afdekhoezen in het assortiment. Doordat de hoes aan beide kanten is bedrukt met een groene en rode smiley, hoeft u voor transport slechts één hoes te gebruiken.

Een aantal kenmerken van onze hoezen zijn;

- beschikbaar in verschillende maten;
- geschikt voor eenmalige toepassing;
- voorzien van smileys aan alle zijdes van de hoes;
- zijn op verzoek naar eigen wens te fabriceren.

Voor het fabriceren van de hoezen naar eigen wens, is uiteraard wel de benodigde informatie nodig om deze te kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan afmetingen van de bakken waar de scopen in worden opgeslagen.

Artikel nr.	Afmetingen	Aantal	Omschrijving	Kleur
240441	510 x 510 x 510 mm	300 stuks	Bovenhoes + onderhoes	X
240442	500 x 400 x 100 mm	400 stuks	Bovenhoes + onderhoes	X
CM-600-400FL	600 x 400 x 100 mm	400 stuks	Bovenhoes + onderhoes	X
DE3000	750 x 500 mm	400 stuks	'DROOG' met plakrand	Groen
DE3010	750 x 500 mm	400 stuks	'NAT' met plakrand	Blauw
DE3020	850 x 550 mm	400 stuks	Met trekrand	Rood



CSD: Transportwagens & bakken.

Multi-ft wagens

De Multi-ft wagens zijn voorzien van;

- 6 uitneembare lades, die kunnen worden gedesinfecteerd;
- 4 zwenkwielen, waarvan de voorste geremd zijn.

De Multi-ft wagens zijn zo ontwikkeld dat er een veilig transport van de endoscopen wordt gewaarborgd. De wagen heeft een open voorzijde met een gesloten zij- en achterkant. Daarnaast is zo ontwikkeld dat - door gebruik van onze smileyhoezen - in één oogopslag duidelijk is of de endoscoop schoon of vuil is.

De uitneembare bakken zijn hittebestendig tot 93 °C; deze kunnen dus machinaal gereinigd worden. Doordat de wagen glad is afgewerkt, is dit eenvoudig naar schoonmaak toe. De uitneembare bakken kunnen op het daarvoor bedoelde bovenblad geplaatst worden.

Onderstaand in de tabel staan de twee varianten van transportwagens voor scopen weergegeven.

Artikel nr.	Afmetingen	Omschrijving	Aantal lades
240440	610 x 610 x 980 mm	Multi-ft wagen	6
240445	510 x 510 x 100 mm	Losse lade	1

Wist u dat...

het mogelijk is om een muurdispenser (Artikel nr. 240443) te bestellen om de smileyhoezen voor de scopen overzichtelijk op te slaan. Deze muurdispenser dient als handige opslag voor de hoezen aan de muur. De afmetingen van de muurdispenser zijn: 610 x 610 x 980 mm.



CSD: Transportwagens & bakken.

ABS bakken

De ABS bakken zijn mogelijk bij te bestellen om de scopen in de transportwagens te vervoeren. Deze bakken zijn speciaal ontwikkeld voor de reiniging van deze scopen, zodat deze ook bestendig zijn voor het sterilisatie proces.

Deze bakken - afmetingen: 600 x 400 mm - zijn robuust, zeer sterk en bestand tegen hoge temperaturen voor optimale hygiëne. Temperatuurbereik -20 °C tot + 60 °C.

Onderstaand staan een aantal eigenschappen van deze bakken op een rij:

- laadcapaciteit tot 35 kg;
- lage breekweerstand;
- antistatisch;
- nestelbaar.

Afmeting (b x d x h)	Zijkant gerperfor- eerd dichte bodem	Zijkant & bodem geperforeerd	Volledig dicht	Vakverdeler kort 400 mm	Vakverdeler lang 600 mm
600 x 400 x 50 mm	x	x	MR0605	MR0645	MR0665
600 x 400 x 100	MR0601	MR0651	MR0611	MR0641	MR0661
600 x 400 x 200	MR0602	x	MR0612	MR0642	MR0662



CSD: Spoelkorven.

Spoelkorven

In deze draadkorven kunnen kleine onderdelen veilig bewaard en toch optimaal gereinigd worden. De deksels zijn stevig met de korven verbonden en kunnen met een handgreep geopend en gesloten worden. De spoelkorven bieden een praktische en hygiënische oplossingen voor het opbergen, transporteren en reinigen van medische instrumenten en accessoires. Dankzij de open structuur zorgen de korven voor een efficiënte doorstroming van water en reinigingsmiddelen, wat bijdraagt aan een grondige reiniging en sterilisatie.

Onderstaand staat een overzicht weergegeven van onze diverse spoelkorven.

Spoelkorf voor kleine delen van RVS



- Met deksel
- Met bodemframe
- Maaswijdte: 1.6 x 1.6 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501282: 80 x 40 x 32 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501220: 80 x 40 x 42 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501132: 80 x 80 x 42 mm

Spoelkorf voor kleine delen van RVS



- Met deksel
- Met bodemframe
- Maaswijdte: 1.6 x 1.6 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501204: 200 x 100 x 50 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501133: 220 x 140 x 54 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501135: 275 x 174 x 36 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501161: 210 x 150 x 42 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501162: 310 x 214 x 42 mm

Spoelkorf voor kleine delen met geperforeerde wanden



- Afneembare deksel
- Met bodemframe
- Wanden van geperforeerde plaat met fijne perforatie, bodem en deksel van gelast rooster
- Maaswijdte: 6 x 6 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501150: 240 x 250 x 40 mm
- Afmetingen artikel nr. 7501151: 480 x 250 x 40 mm

*De afmetingen van de artikelen worden weergegeven in: b x d x h.

Cazander Medical.

Wie zijn wij

Cazander Medical levert logistieke oplossingen, medisch meubilair en verbruiksgoederen aan zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, verpleeghuizen, farmaceutische en tandheelkundige instellingen, maar ook privéklinieken en dierenklinieken.

Heeft u hulp nodig bij het inrichten van uw ziekenhuisafdeling, opslagruimte, cleanroom of operatiekamer? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij denken mee vanuit praktisch en financieel oogpunt en ondersteunen bij de keuze voor het juiste materiaal.

Ons assortiment

In ons assortiment treft u investeringsgoederen aan voor inrichting, opslag, transport en logistiek binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Zo leveren wij logistieke goederen die bijvoorbeeld op de OK en de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) gebruikt worden en modulaire wagens die op poliklinieken en verpleegafdelingen in het ziekenhuis worden ingezet.

Daarnaast hebben wij een zeer uiteenlopend aanbod van medische verbruiksartikelen voor tijdens een operatie of andere medische ingreep, zoals boren, zaagbladen en proceduresets.

Samen sterk in de zorg

Bij Cazander Medical ligt het accent op persoonlijke aandacht en ondersteuning bij de keuze voor het juiste materiaal. We denken met u mee vanuit praktisch en financieel oogpunt. We doen ons werk met aandacht en nemen de tijd voor ieder vraagstuk binnen ons vakgebied. Samen staan we sterk in de zorg!



Advies of offerte nodig?

Cazander Medical B.V.
Kastanjelaan 41
3241 BH Middelharnis

www.cazandermedical.nl
+31 187 470 666
info@cazandermedical.nl



Volg ons op onze socials



Cazander Medical



@cazandermedical





Kastanjelaan 41
3241 BH MIDDELHARNIS

+31 (0)187 47 06 66
info@cazandermedical.nl

www.cazandermedical.nl

